

Regia partner



PRIMA INSTALLAZIONE

1° STEP


Togliere dai cartoni le due basi dei letti e poi posizionarle a terra.

2° STEP

IMPORTANTE!

I motori di movimentazione schienale e cosce si trovano fissati nella loro posizione di trasporto. Toglierli dalle loro guide e posizionarli a terra.

Non estrarre gli spinotti di connessione. Agganciarli nelle posizioni libere rispettando il verso come da foto a lato.

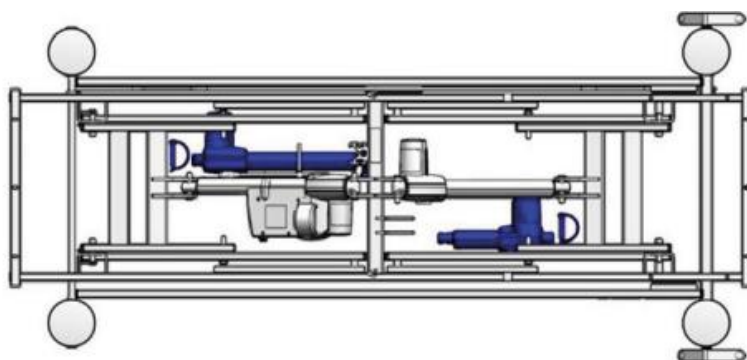

3° STEP

Sui telai di entrambe le basi si trova una scatola di distribuzione. Estrarre dalla confezione il cavo di sincronizzazione in dotazione ed inserire entrambe le estremità nelle porte libere della scatola di distribuzione, collegando così le due basi. Assicurare entrambi gli spinotti spingendo giù la linguetta di sicurezza.



NOTA BENE

Spingere gli spinotti nelle loro sedi fino a quando l'anello giallo sugli stessi non è più visibile.

4° STEP

Inserire gli spinotti dei trasformatori nelle prese nere lato testiera, situate sotto la rete, ed accertarsi dell'inserimento corretto fino alla scomparsa dell'anello giallo. Abbassare il cappuccio di sicurezza sulla presa.

Inserire entrambi i trasformatori nelle prese di corrente (foto di lato).




5° STEP



Utilizzando una delle due pulsantiiere, premere il tasto di salita a sinistra della terza fila di pulsanti finché la base si alza completamente fino a fine corsa.

6° STEP

Posizionare le reti sopra le basi dei letti, assicurandole con i pomelli ed installando le scatole di distribuzione.

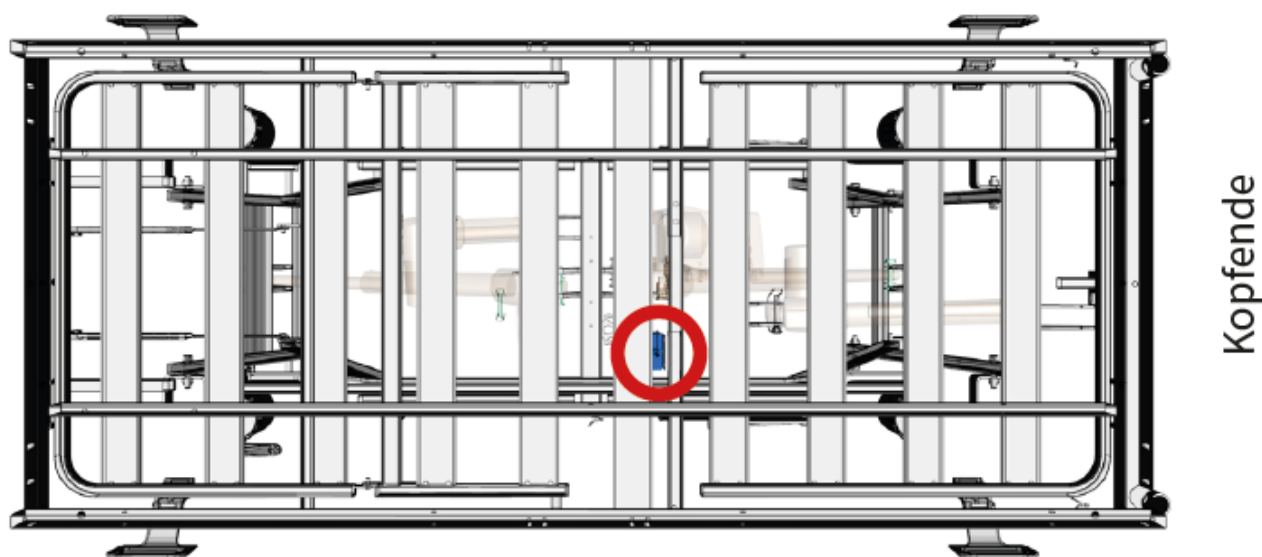

Regia partner



RIMESSA IN FUNZIONE DOPO UNA RIPARAZIONE O UN MALFUNZIONAMENTO



ATTENZIONE: leggere attentamente tutti gli step, prima di iniziare la procedura, poiché la sincronizzazione si interrompe se da uno step all'altro trascorrono più di 10 secondi.



1° STEP

Verificare se le due basi sono connesse con il cavo di sincronizzazione. Se non lo fossero, inserire nuovamente le estremità dei cavi nelle scatole di distribuzione.



2° STEP

Quando i due letti sono stati collegati correttamente, i LED lampeggiano dall'alto verso il basso. La sincronizzazione può iniziare.



3° STEP

Premere contemporaneamente su una delle due pulsantiere la coppia di tasti della 4° fila (regolazione cosce) e portare il comando vicino ad uno dei magneti arancioni, contenuti nelle guide mobili del materasso, tenendo premuti i tasti indicati.


Viene emesso un segnale acustico: il LED della prima fila di tasti si accende e quello della seconda fila di tasti lampeggia. Il letto si trova ora nella modalità LETTO SINGOLO.



4° STEP

Premere ora contemporaneamente i due tasti della 2° fila per attivare la modalità LETTO PARTNER. Dopo circa 10 secondi, mantenendo premuti i tasti, viene emesso un segnale acustico ed il LED della regolazione in altezza lampeggia. Ciò significa che le reti non si trovano alla stessa altezza e devono essere sincronizzate.

Lasciare le dita dai pulsanti.

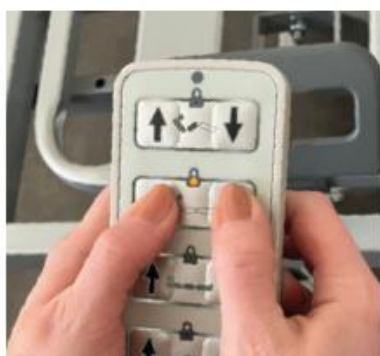

5° STEP

Per sincronizzare le due reti, utilizzare una delle due pulsantiere premendo contemporaneamente i due pulsanti della 2° fila. Si udirà un segnale acustico, che poi muterà in uno più breve. A questo punto, togliere le dita dai tasti.



6° STEP

Portare la rete alla sua massima altezza da terra, utilizzando il tasto a sinistra con freccia verso l'alto della 3° fila. Dopo aver raggiunto l'altezza massima, togliere il dito dal tasto. Il segnale acustico cesserà ed i letti sono ora sincronizzati.



7° STEP

Per motivi di sicurezza, entrambe le pulsantiere sono ancora bloccate. Ciò è riscontrabile dai LED arancioni accesi sui lucchetti. Di seguito viene descritta la procedura di sblocco.

La procedura di sblocco della pulsantiera è la seguente:

1) avvicinare brevemente il comando a uno dei magneti arancioni, situati nei ferma materassi, senza premere alcun tasto;

poi

2) premere il tasto sinistro della 2° fila;

poi

3) premere il tasto sinistro della 3° fila;

poi

4) premere il tasto sinistro della 4° fila;

poi

5) premere il tasto sinistro della 1° fila.

Nel caso in cui si volessero sbloccare le ultime due funzioni situate in basso sulla pulsantiera, premere, dopo la sequenza sopra descritta, i relativi tasti sinistri.

Per utilizzare la pulsantiera, avvicinarla ancora una volta al magnete oppure attendere 10 secondi.

Per abilitare la seconda pulsantiera, ripetere la sequenza descritta in questo 7° step.