

PROCEDURA DI RESET

Inizializzazione del comando/Reset

Durante l'inizializzazione, vengono trasmesse all'unità di comando le posizioni attuali degli attuatori.

Quando si esegue?

- In occasione della prima messa in funzione
- Modifica da letto singolo a letto doppio (versione letto a due piazze)
- Dopo la sostituzione dell'unità di comando, di un motore di sollevamento o di entrambi i motori di sollevamento
- Quando non è possibile regolare l'altezza del piano letto o solo in parte



L'inizializzazione può essere effettuata solo dal personale tecnico.

In fase di inizializzazione non deve essere bloccata alcuna funzione dell'interruttore manuale!

Eventuali limitazioni memorizzate della regolazione dell'altezza verso il basso vanno perse.


Tra le fasi non devono esserci pause superiori a 6 secondi senza pressione di tasti, poiché altrimenti si ritorna alla modalità operativa normale.

Operazioni da eseguire sull'interruttore manuale HL7



ATTENZIONE: togliere corrente fino allo spegnimento del led sul trasformatore (circa 20 secondi), poi reinserire la spina nella presa.

PUNTO 1

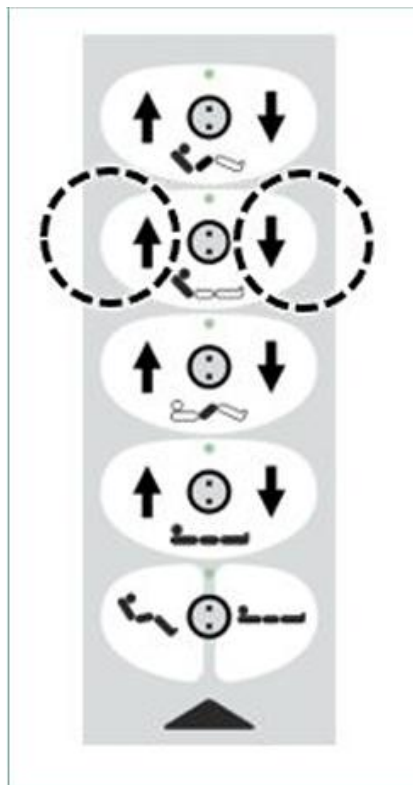


Premere contemporaneamente e mantenere premuti i due tasti contrassegnati: (= RESET/manual mode)

- Risuona un segnale sonoro rapido a intervalli.
- Dopo circa 5 secondi risuonano segnali sonori lenti a intervalli.
- Togliere i pollici da entrambi i pulsanti.
- L'interruttore manuale si trova ora nello stato RESET/manual mode.

ATTENZIONE: se i motori si trovassero a fine corsa (tutto su o giù) l'inizializzazione è stata eseguita con successo. Altrimenti, proseguire come descritto di seguito al punto 2.

PUNTO 2

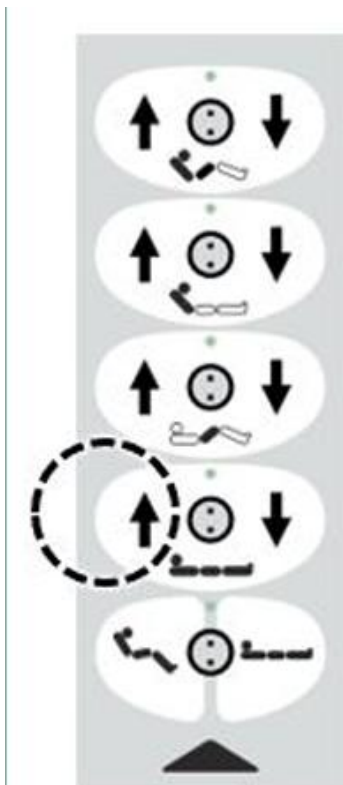

Premere e tenere premuto la freccia in su del pulsante della regolazione in altezza della rete fino alla massima altezza. Una volta raggiunta, il motore si ferma. Continuare a tenere premuto il tasto per ulteriori 2 secondi. Togliendo il dito dal pulsante, il segnale acustico termina.

Ora tutte le funzioni sono state resettate e pertanto pronte all'uso.