

W

Woven Air

MANUALE D'USO



CUSCINO AD ARIA WOVEN AIR



CUSCINO AD ARIA WOVEN AIR SPRINT




INSERTI AD ARIA IN TESSUTO

By **ROLAPAL**

CONTENUTI

Argomenti trattati nel manuale	3
Specifiche del prodotto	3
Articoli inclusi nella confezione	4
Accessori	5
Specifiche degli inserti tubolari e dimensioni del cuscino	7
Uso previsto	8
Attenzione: rischi identificati	8
Esclusioni di responsabilità	8
Istruzioni per l'installazione	9
Adattamento del cuscino in base all'utente	10
Conoscere il tuo cuscino ad aria intrecciato	11
Indicazioni per la manutenzione	14
Risoluzione dei problemi	14


SIMBOLI

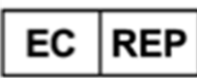	Identifica i prodotti che soddisfano i requisiti della normativa 2017/745 / UE sui dispositivi medici		Codice lotto
	Indica che un prodotto è un dispositivo medico		Numero di catalogo
	Mostra il produttore del dispositivo medico		Data di fabbricazione
	Certificazioni WC20 e ISO 7176-19 per l'utilizzo frontale su veicolo a motore		Rappresentante autorizzato nella Comunità europea
	Peso del prodotto (kg)		Consultare il manuale d'uso
	Peso massimo dell'utente (kg)		Avvertenze
	Dimensioni del prodotto		


Argomenti trattati nel manuale

	CUSCINO AD ARIA WOVEN AIR Il cuscino ad aria Woven Air è suddiviso in 4 zone, permettendo all'aria di fluire liberamente in ciascuna di esse e favorendo il posizionamento e la redistribuzione della pressione. Altezza sotto l'utente: 55 mm.
	CUSCINO AD ARIA WOVEN AIR SPRINT Il cuscino Air Sprint tessuto è un modello ultrasottile dotato di una base stabile in schiuma a celle chiuse. Offre supporto aggiuntivo sotto le cosce e integra la tecnologia Woven Air nella zona ischiatica, rendendolo una scelta ideale per utenti con propulsione manuale.
	INSERTI AD ARIA IN TESSUTO PER CUSCINI G7 E STX2 Gli inserti Woven Air sono progettati per adattarsi al pozzo ischiale dei cuscini Dreamline G7 e STX2 come alternativa agli inserti in gel.

Specifiche del prodotto

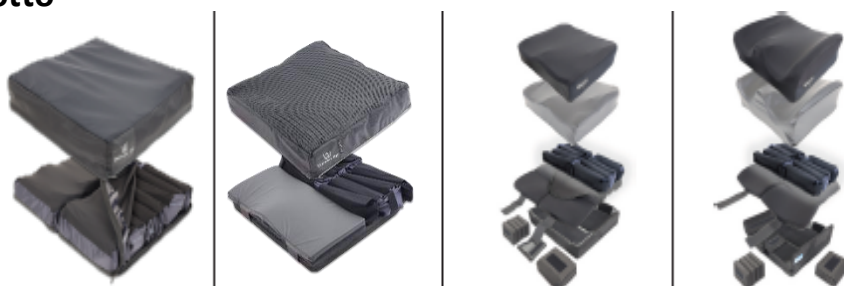

	SERIE CUSCINI A PRESSIONE			
	Woven Air	Sprint	G7	STX2
CODICE	WACxxxx	WSCxxx	D7CWxxxx	DX2CWxxxx
COMPOSIZIONE	Aria	Spugna e aria	Spugna e aria	
LARGHEZZA	14" – 20" (36 cm – 51 cm)		14" – 20" (36 cm – 51 cm)	
PROFONDITÀ	14" – 22" (36 cm – 56 cm)		14" – 22" (36 cm – 56 cm)	
*PESO MEDIO DEL CUSCINO	1.2 kg (2.65 lbs)	0.9 kg (1.98 lbs)	1.6 kg (3.53 lbs)	1.9 kg (4.19 lbs)
ALTEZZA SOTTO L'UTENTE	55 mm	65 mm	85 mm	
LIMITE DI PESO DELL'UTENTE	180 kg/397lb		136kg/300lb	

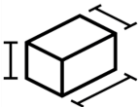ARTICOLO			
Cuscino ad aria Woven Air	Fino a 2 kg	180 kg	51 cm x 56 cm x 10 cm
Cuscino ad aria Woven Air in tessuto	Fino a 1,8 kg	180 kg	51 cm x 56 cm x 10 cm
STX2 con cuscino ad aria Woven Air	Fino a 2,7 kg	136 kg	51 cm x 56 cm x 16 cm
G7 con cuscino ad aria Woven Air	Fino a 2,7 kg	136 kg	51 cm x 56 cm x 10 cm

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Cuscino ad aria Woven Air

1. Copertura esterna
2. Tasca ad aria interna
3. Inserti tubolari ad aria (vedere la tabella seguente per le quantità)



Cuscino ad aria Woven Air in tessuto

1. Copertura esterna
2. Cuscinetto per coscia
3. Tasca ad aria interna
4. Inserti tubolari ad aria (vedere la tabella seguente per le quantità)
5. Base sagomata



Inserto in tessuto G7 / STX2

1. Tasca ad aria interna
2. Inserti tubolari ad aria (vedere la tabella seguente per le quantità)



Materiali interni del cuscino: Tubi in nylon/uretano, tasca pneumatica in poliestere/nylon/uretano (senza lattice)

Materiali della fodera del cuscino: Fare riferimento all'etichetta di manutenzione sul coperchio

ACCESSORI

BASE SAGOMATA E REGOLABILE DEL CUSCINO AD ARIA: offre una leggera sagomatura al cuscino per aumentare la stabilità e ridurre i punti di pressione.

La base sagomata è progettata unicamente il cuscino della serie Woven Air, mentre il cuscino della serie Woven Air Sprint dispone di basi sagomate di serie. La base regolabile, invece, è progettata sia per il cuscino Woven Air che per il cuscino Woven Air Sprint



WAC141414CB	WAC1416CB	WAC1418CB	WAC1515CB	WAC1516CB
WAC1517CB	WAC1616CB	WAC1618CB	WAC1620CB	WAC1717CB
WAC1719CB	WAC1816CB	WAC1818CB	WAC1820CB	WAC1822CB
WAC1919CB	WAC2018CB	WAC2020CB	WACCUSTCB	WACCUSTXLCB



WAC1414AB	WAC1416AB	WAC1418AB	WAC1515AB	WAC1516AB
WAC1517AB	WAC1616AB	WAC1618AB	WAC1620AB	WAC1717AB
WAC1719AB	WAC1816AB	WAC1818AB	WAC1820AB	WAC1822AB
WAC1919AB	WAC2018AB	WAC2020AB	WACCUSTAB	WACCUSTXLAB

INSERTI TUBOLARI EXTRA IN TESSUTO: inserti tubolari ad aria in tessuto per cuscino Woven Air e cuscino Woven Air Sprint




CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA INSERTO	QUANTI TÀ
WAT1470	Inserto tubolare 14" x 70 mm (per cuscini Sprint/Woven Air)	870	4 pz
WAT1570	Inserto tubolare 15" x 70 mm (per cuscini Sprint/Woven Air)	930	4 pz
WAT1670	Inserto tubolare 16" x 70 mm (per cuscini Sprint/Woven Air)	990	4 pz
WAT1770	Inserto tubolare 17" x 70 mm (per cuscini Sprint/Woven Air)	1050	4 pz
WAT1870	Inserto tubolare 18" x 70 mm (per cuscini Sprint/Woven Air)	1110	4 pz
WAT1970	Inserto tubolare 19" x 70 mm (per cuscini Sprint/Woven Air)	1150	4 pz
WAT2070	Inserto tubolare 20" x 70 mm (per cuscini Sprint/Woven Air)	1200	4 pz
WAT70CUSTXL	Inserto tubolare da 22" x 70 mm (per cuscini Sprint/Woven Air)	Fino a 1400	4 pz
WAT1690	Inserto tubolare 16" x 90 mm (per cuscini Sprint/Woven Air)	990	4 pz
WAT1790	Inserto tubolare 17" x 90 mm (per cuscini Sprint/Woven Air)	1050	4 pz
WAT1890	Inserto tubolare 18" x 90 mm (per cuscini Sprint/Woven Air)	1100	4 pz
WAT1990	Inserto tubolare 19" x 90 mm (per cuscini Sprint/Woven Air)	1150	4 pz
WAT2090	Inserto tubolare 20" x 90 mm (per cuscini Sprint/Woven Air)	1200	4 pz
WAT90CUSTXL	Inserto tubolare da 22" x 90 mm (per cuscini Sprint/Woven Air)	Fino a 1400	4 pz

Inserti tubolari in tessuto per cuscini ad aria Woven Air STX2/G7

CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA INSERTO	QUANTITÀ
WAT1460	Inserto tubolare 14" x 60 mm (per cuscini STX2/GT)	750	4 pz
WAT1560	Inserto tubolare 15" x 60 mm (per cuscini STX2/GT)	810	4 pz
WAT1660	Inserto tubolare 16" x 60 mm (per cuscini STX2/GT)	870	4 pz
WAT176	Inserto tubolare 17" x 60 mm (per cuscini STX2/GT)	930	4 pz
WAT1860	Inserto tubolare 18" x 60 mm (per cuscini STX2/GT)	990	4 pz
WAT1960	Inserto tubolare 19" x 60 mm (per cuscini STX2/GT)	1050	4 pz
WAT2060	Inserto tubolare 20" x 60 mm (per cuscini STX2/GT)	1110	4 pz
WAT60CUSTXL	Inserto tubolare da 22" x 60 mm (per cuscini STX2/GT)	Fino a 1200	4 pz

BASE RIGIDA DEL CUSCINO: si fissa tramite un gancio direttamente all'anello corrispondente situato sul lato inferiore del cuscino.

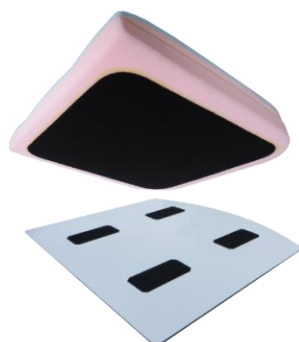

DCRB1414	DCRB1416	DCRB1418	DCRB1515	DCRB1517
DCRB1519	DCRB1616	DCRB1618	DCRB1620	DCRB1717
DCRB1719	DCRB1816	DCRB1818	DCRB1820	DCRB1822
DCRB1919	DCRB2018	DCRB2020	DCRBCUST	DCRBCUSTXL

CUSCINETTI PER L'OBLIQUITÀ PELVICA: si collegano tramite un gancio all'anello corrispondente sul lato inferiore interno del cuscino.



Questo accessorio può essere utilizzato con il cuscino ad aria Woven Air e con il cuscino Air Sprint in tessuto.

(Set da 4)

DCOP14	DCOP16	DCOP18	DCOP20
--------	--------	--------	--------

BASE PER L'OBLIQUITÀ PELVICA

CUSCINO (lunghezze e dei cuscini)	14"	16"	18"	20"
LARGHEZZA/LUNGHEZZA DELLA BASE	160x160	185x185	210x210	235x235
ALTEZZA DELLA BASE (mm)	10	10	10	10
CODICE (Set da 4)	DCOP14	DCOP16	DCOP18	DCOP20

Base personalizzata disponibile. Utilizzare il codice DCOPCUST

COPERTURE ESTERNE E INTERNE



La copertura esterna è identificata dalle lettere "OC" aggiunte alla fine del codice del cuscino.

La copertura interna è identificata dalle lettere "IC" aggiunte alla fine del codice del cuscino.

DIMENSIONI DEL CUSCINO E SPECIFICHE DEGLI INSERTI TUBOLARI

DIMENSIONI DEL CUSCINO	CODICE CUSCINO AD ARIA WOVEN AIR	INSERTI TUBOLARI INTERNI DEL CUSCINO AD ARIA WOVEN AIR (per ciascun cuscino sono compresi anche 2 inserti tubolari extra di ricambio)	CODICI DEI CUSCINI AD ARIA WOVEN AIR SPRINT	INSERTI TUBOLARI INTERNI DEL CUSCINO AD ARIA WOVEN SPRINT (per ciascun cuscino sono compresi anche 2 inserti tubolari extra di ricambio)
14X14	WAC1414	16	WSC1414	8
14X16	WAC1416	16	WSC1416	8
14X18	WAC1418	16	WSC1418	8
15X15	WAC1515	16	WSC1515	8
15X16	WAC1516	16	WSC1516	8
15X17	WAC1517	16	WSC1517	8
16X16	WAC1616	16*	WSC1616	8
16X18	WAC1618	16*	WSC1618	8
16X20	WAC1620	20*	WSC1620	10
17X17	WAC1717	16*	WSC1717	8
17X19	WAC1719	16*	WSC1719	8
18X16	WAC1816	16*	WSC1816	8
18X18	WAC1818	16*	WSC1818	8
18X20	WAC1820	20*	WSC1820	10
18X22	WAC1822	20*	WSC1822	10
19X19	WAC1919	20*	WSC1919	10
20X18	WAC2018	20*	WSC2018	10
20X20	WAC2020	20*	WSC2020	10

* Utilizza inserti ad aria alti 90 mm (gli altri modelli utilizzano tubi)

CODICI INSERTI TUBOLARI AD ARIA IN TESSUTO G7 / STX2	INSERTI TUBOLARI INTERNI DEI CUSCINI G7 / STX2 (per ciascun cuscino sono compresi anche 2 inserti tubolari extra di ricambio)
WAI1414	6
WAI1416	6
WAI1418	6
WAI1515	6
WAI1516	6
WAI1517	6
WAI1616	6
WAI1618	6
WAI1620	8
WAI1717	6
WAI1719	6
WAI1816	6
WAI1818	6
WAI1820	8
WAI1822	8
WAI1919	8
WAI2018	8
WAI2020	8

* Utilizza inserti ad aria alti 60 mm

USO PREVISTO

La tecnologia Woven Air è concepita come superficie di supporto a galleggiamento d'aria. Gli inserti tubolari ad aria presenti in questi cuscini si modellano sul corpo dell'utente se dimensionati correttamente, contribuendo alla ridistribuzione della pressione e al massimo comfort.

Per qualsiasi dubbio sull'installazione del prodotto o sulla compatibilità con le sedie a rotelle, si raccomanda di contattare il servizio clienti ROLAPAL.

Controindicazioni: Questa valutazione deve essere effettuata da un prescrittore esperto. Questo prodotto deve essere utilizzato nell'ambito di un piano terapeutico completo.



ATTENZIONE – RISCHI IDENTIFICATI

Rimozione degli inserti tubolari ad aria: verificare che sotto l'utente rimanga sufficiente aria, in modo da evitare che affondi nel cuscino e ridurre il rischio di lesioni da pressione.

- Aggiunta di inserti tubolari ad aria: un eccesso di aria rende il cuscino rigido, impedendo un corretto affondamento dell'utente e aumentando il rischio di concentrazione della pressione. Rischi legati alla regolazione del cuscino:
- poiché il cuscino è regolabile, durante la riconfigurazione prestare attenzione a ottenere l'effetto desiderato per l'utente.
- Tenere lontano da fonti di calore e fiamme libere. Il cuscino potrebbe sperimentare danni.
- Prestare attenzione se il cuscino viene lasciato in esposizione diretta al sole. Le sue parti potrebbero riscaldarsi, accrescendo il rischio di scottature per l'utente.
- Quando si utilizza una base rigida, il cuscino deve sporgere dal bordo anteriore di almeno ½" (13 mm) per proteggere la pelle dal contatto con il bordo della seduta.
- Peso massimo dell'utente: non utilizzare il cuscino se il peso dell'utente supera quello massimo raccomandato.
- Montaggio scorretto: un cuscino installato in modo errato può comportare rischi per l'utente. Istruzioni di posizionamento: leggere attentamente le istruzioni per il corretto orientamento e posizionamento del cuscino sulla sedia a rotelle.

SEGNALAZIONE DI INCIDENTI

Tutti gli incidenti gravi riguardanti il prodotto devono essere segnalati a ROLAPAL Ltd e all'autorità competente locale.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

A causa della regolabilità del cuscino, Rolapal non si assume alcuna responsabilità sull'esito terapeutico per l'utente. La responsabilità ricade sul terapeuta o tecnico prescrittore della seduta.

RIUTILIZZO

Il prodotto è idoneo al riutilizzo. Il passaggio di consegna per il riutilizzo deve avvenire solo dopo che il prodotto è stato controllato da personale specializzato.

CONDIZIONI SPECIALI DI CONSERVAZIONE E MANIPOLAZIONE

Non conservare in ambienti con temperatura superiore a 50°C. Evitare l'esposizione a tetti non isolati o fonti di calore diretto/indiretto.

DURATA DEL PRODOTTO

La durata prevista del cuscino è di 2-5 anni in condizioni d'uso normale, ma può variare notevolmente tra gli utenti a seconda del tempo di utilizzo, dell'ambiente e del peso dell'utente.

SMALTIMENTO A FINE VITA

Al termine del ciclo di vita utile, l'intero cuscino deve essere smaltito come rifiuto generico.

GARANZIA

I cuscini Woven Air sono realizzati secondo standard elevati e sono garantiti contro difetti di materiali e lavorazione per 18 mesi in condizioni di uso normale.

Gli articoli difettosi saranno riparati o sostituiti a discrezione di Rolapal Ltd.

I prodotti devono essere restituiti a Rolapal Ltd per la valutazione; il nuovo articolo riparato o sostituito sarà inviato senza costi aggiuntivi. La garanzia non copre danni derivanti da normale usura, uso improprio o negligenza.

INSTALLAZIONE DEL CUSCINO WOVEN AIR SULLA SEDIA A ROTELLE

FISSAGGIO

Il cuscino è progettato per essere fissato alla sedia a rotelle tramite gancio/velcro, direttamente sulla base della seduta o sull'imbottitura sospesa, oppure su una base separata montata appositamente.

Verificare che il cuscino si adatti correttamente al telaio della sedia. Se il cuscino è troppo stretto, potrebbe muoversi durante l'uso. Il cuscino deve essere posizionato aderente tra i braccioli (lati esterni delle guide della seduta).

Verificare che la lunghezza del cuscino corrisponda alla lunghezza della sedia; se troppo corto, la base della sedia rimarrebbe scoperta, esponendo l'utente a rischi.


Se la seduta sospesa provoca un effetto "amaca", utilizzare la Dreamline Cushion Rigid Base. Quest'ultima si fissa tramite gancio/velcro sotto la schiuma interna del cuscino.

ORIENTAMENTO

Le etichette di manutenzione e cura sulle fodere e sull'interno del cuscino indicano il retro inferiore del cuscino. La superficie morbida ed elastica rappresenta la parte superiore.

I lati del cuscino devono essere paralleli alle guide della seduta.

Parte anteriore

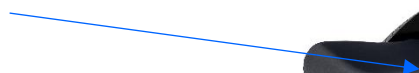

ADATTAMENTO DEL CUSCINO IN BASE ALL'UTENTE

Prima del montaggio, verificare che le dimensioni del cuscino siano adatte all'utente. Il cuscino deve sostenere completamente la base del corpo dell'utente. I cuscini Woven Air™ offrono il massimo effetto nella gestione della pressione se le dimensioni del cuscino sono il più possibile vicine a quelle dell'utente.

Se l'utente presenta una discrepanza nella lunghezza delle gambe, utilizzare il cuscino Woven Air Sprint, il G7 o lo STX2 Cushion con l'inserto Woven Air e applicare le modifiche necessarie per compensare la differenza di lunghezza delle gambe. (Nota bene: il cuscino Woven Air completo non può essere modificato).

Assicurarsi che la distanza dalla superficie superiore del cuscino alla superficie superiore della pedana sia correttamente impostata in base all'utente. Il lato sinistro potrebbe differire dal lato destro, pertanto entrambi devono essere misurati singolarmente. La lunghezza della gamba inferiore deve essere regolata in modo che la parte anteriore del cuscino supporti leggermente il peso dell'utente.

Utilizzare i cuscinetti di posizionamento per compensare o correggere eventuali asimmetrie pelviche. Questi possono essere regolati secondo le indicazioni del terapeuta prescrittore per modificare in modo asimmetrico i contorni del cuscino, ad esempio per accrescere il piano preischiale o correggere l'obliquità pelvica.

NOTA BENE: È preferibile utilizzare i cuscinetti di posizionamento per correggere o compensare le asimmetrie, piuttosto che regolare le celle d'aria, poiché modificare le celle d'aria potrebbe compromettere l'effetto di ridistribuzione della pressione del cuscino.

REGOLAZIONE DEI CUSCINI WOVEN AIR

I cuscini e gli inserti Woven Air vengono spediti dalla fabbrica con un numero predeterminato di tubi ad aria installati nel cuscino (vedi tabella a pagina 5).

Talvolta è necessario regolare la ridistribuzione della pressione del cuscino in base alla conformità dell'utente. La sacca del cuscino ad aria regolabile tramite l'aggiunta o la rimozione di un inserto tubolare ad aria.

Per il cuscino Woven Air, rimuovere la copertura esterna e aprire la copertura interna per accedere alla sacca contenente gli inserti tubolari ad aria. Nota bene: il cuscino Woven Air Sprint non dispone di copertura interna.


CONOSCERE IL TUO CUSCINO

1. Inserti tubolari ad aria: ciascun inserto tubolare contiene una quantità preriempita di aria.

Ogni inserto tubolare ad aria dispone di una cucitura lungo tutta la lunghezza. Durante l'installazione, è preferibile che la cucitura sia rivolta verso il basso, in modo da non entrare in contatto con l'utente.

I numeri sono stampati a un'estremità di ogni tubo. Le prime 2 cifre si riferiscono alla larghezza del cuscino in cui si adatterà in pollici (cioè tutti i cuscini larghi 18").

Le seconde 2 cifre si riferiscono all'altezza del tubo in mm (cioè 90 = 90 mm di altezza)

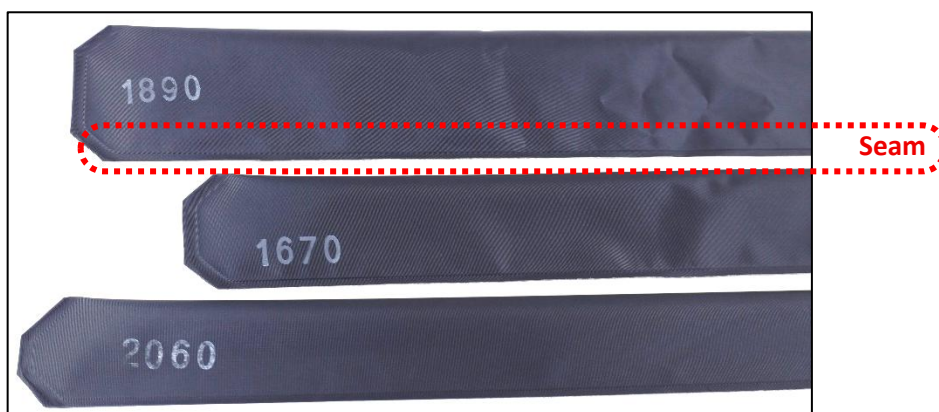


Ogni inserto tubolare ad aria dispone di un ovale termopresso al centro.



2. **Sacca del cuscino ad aria:** la sacca è l'interno del cuscino Woven Air che contiene gli inserti tubolari ad aria. La sacca è suddivisa in due sezioni: sinistra e destra.



Il lato inferiore della sacca è realizzato in tessuto a strappo. Ciò consente il fissaggio dei cuscinetti di posizionamento, come la base sagomata e i cuscinetti per l'obliquità pelvica.

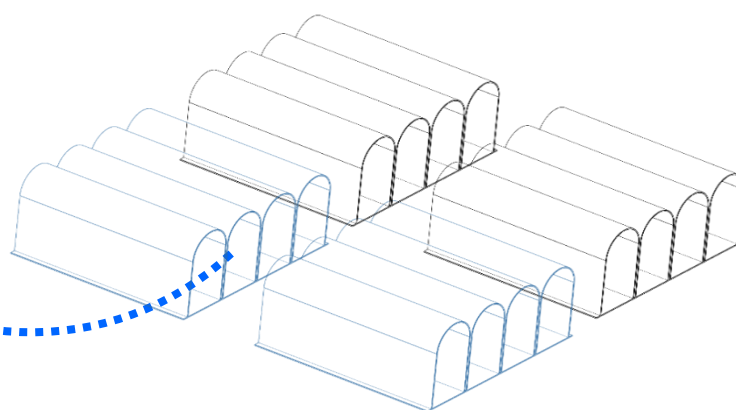

Cuscino ad aria


Ogni sezione sinistra e destra della sacca d'aria contiene 2 zone con 8 tasche, come mostrato in alto (oppure 1 zona con 4 tasche per Sprint, G7 / STX2 con inserti, come mostrato in basso).



Cuscino Sprint




Inserti tubolari G7 / STX2 Woven

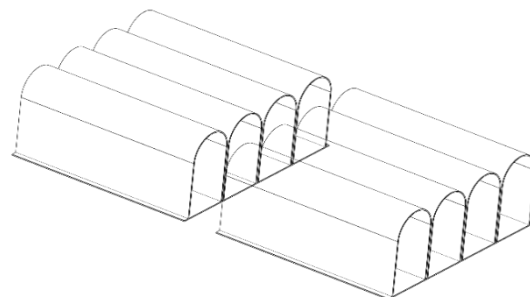

Ogni inserto tubolare ad aria viene inserito attraverso 4 tasche, in modo che l'aria contenuta copra correttamente quella sezione del cuscino. Il disegno della tessitura è mostrato in basso. L'ovale al centro di ogni tubo indica il punto centrale e deve essere rivolto verso il bordo esterno del cuscino, tra la seconda e la terza tasca.


Quando si aggiungono inserti tubolari ad aria extra: Inserire la prima estremità dell'inserto nella tasca 1 ed estrarla dalla tasca 4; Inserire la seconda estremità dell'inserto nella tasca 2 ed estrarla dalla tasca 3.

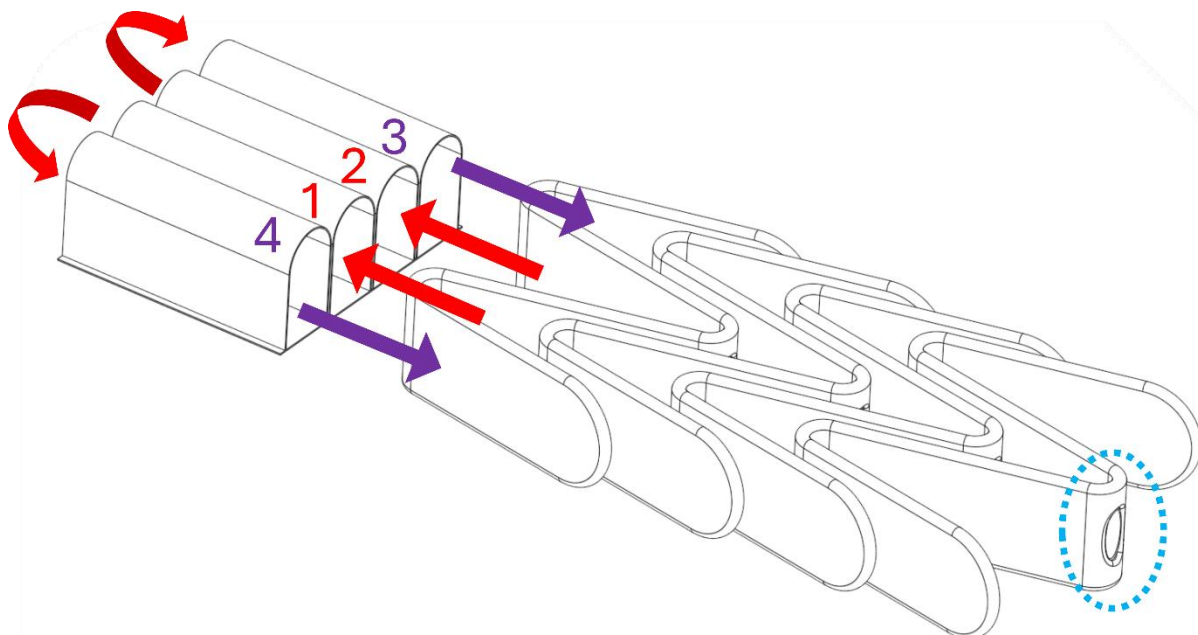


Opzione 2 – Motivo a intreccio a “V” (Dispersione d'aria ridotta):

Questo schema di tessitura è utile per limitare la dispersione dell'aria verso la parte posteriore, in particolare nei casi in cui l'utilizzatore potrebbe non sfruttare l'intera superficie. Racchiude l'aria in zone più piccole, riducendo la possibilità di effetto ponte.

Per prima cosa, piegare il tubo nella posizione centrale “ovale” e inserire le coppie di tubi in 2 tasche invece di 4.

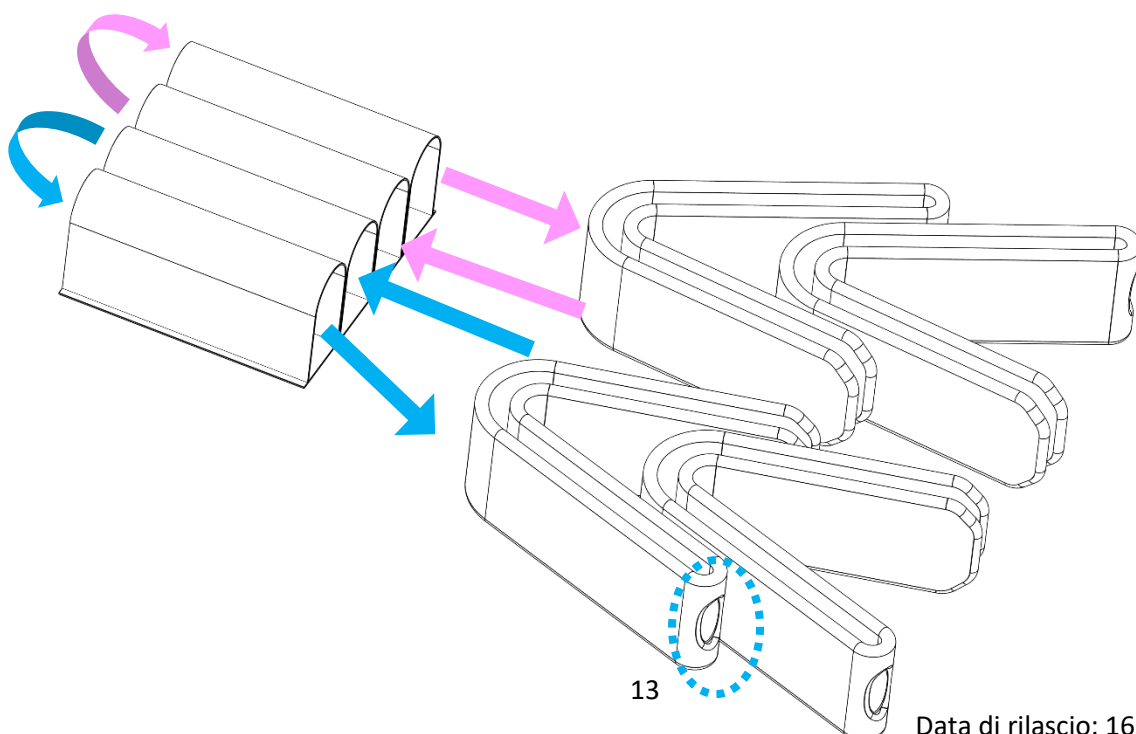

Non sovrapporre gli inserti; assicurarsi che siano posizionati l'uno di fianco all'altro, seguendo lo schema "vista dall'alto" riportato nel diagramma in basso.

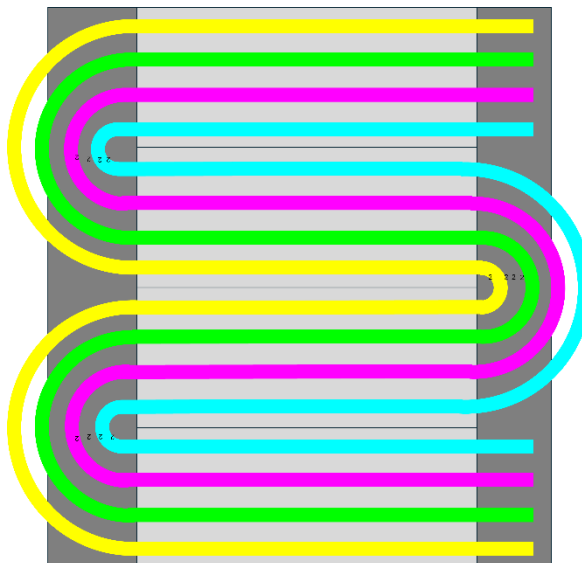

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO



Non stirare



Asciugare senza strizzare



Lavabile in lavatrice



Non usare candeggina o detersivi aggressivi

- **Copertura esterna** (Nylon / Spandex / PU / Poliestere / Neoprene)
 - Lavabile in lavatrice fino a 60°C, ciclo normale. Asciugare senza strizzare. Non stirare. Non usare candeggina o detersivi aggressivi.
- **Copertura per incontinenza (se presente)** (PU / Nylon / Spandex)
 - Lavabile in lavatrice fino a 60°C, ciclo normale. Asciugare senza strizzare. Non stirare. Non usare candeggina o detersivi aggressivi.
- **Sacca del cuscino ad aria con inserti tubolari**
 - Può essere lavata a mano o in lavatrice con detersivi normali.
 - Non rimuovere gli inserti tubolari dalla sacca durante il lavaggio.
 - Inserire la sacca all'interno di una sacca protettiva prima del lavaggio.
 - Selezionare il ciclo delicato.
 - Temperatura massima di lavaggio: 60°C / 140°F.
 - Asciugare senza strizzare.
 - Non usare l'asciugatrice.
 - Non stirare.
 - Non usare candeggina o detersivi aggressivi.
 - Installare le coperture solo se completamente asciutte.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Soluzione
Sento che il corpo affonda nel cuscino	1. Controllare gli inserti tubolari: Verificare che all'interno del cuscino tutti gli inserti contengano aria. Gli inserti danneggiati appariranno schiacciati rispetto a quelli integri; è possibile identificarli senza rimuoverli. Sostituire eventuali inserti tubolari sgonfi. 2. Aggiungere inserti tubolari extra: Se gli inserti tubolari non risultano danneggiati, potrebbe essere necessario aggiungerne altri, ma è necessario consultare prima il terapista o il prescrittore. Distribuire gli inserti tubolari extra in modo uniforme tra lato sinistro e destro.
Il cuscino è troppo rigido	1. Rimuovere gli inserti tubolari in eccesso: Ciò può accadere se sono presenti troppi inserti tubolari nel cuscino. Consultare prima il terapista o il prescrittore. Provare a rimuovere un inserto tubolare da ciascun lato (sinistro e destro) nella parte posteriore del cuscino e monitorare i risultati. Se necessario, rimuovere altri inserti tubolari nella parte anteriore del cuscino. Assicurarsi che l'utente non affondi nel cuscino.
Scivolo in avanti sul cuscino	1. Utilizzare la base sagomata: Per il cuscino Woven Air, utilizzare la base sagomata, che aggiunge un piano preischiale di 17 mm. Questo può contribuire ad aumentare il supporto anteriore della pelvi. 2. Cambiare il tessuto della copertura: Valutare la sostituzione della fodera FLO2 con un'opzione antiscivolo, utilizzando il codice DCMODCF per modificare il tessuto.
Sento di cadere lateralmente sul cuscino	1. Controllare eventuali inserti tubolari sgonfi: Ispezionare il lato in cui si percepisce instabilità e sostituire gli inserti tubolari sgonfi, se necessario. 2. Consultare il terapista: potrebbe rendersi necessario aggiungere cuscinetti di posizionamento supplementari per garantire un corretto supporto della pelvi.
Dispersione dell'aria verso il retro / aspetto appiattito dei tubi	1. Motivo di tessitura opzionale a "V". La dispersione dell'aria può verificarsi posteriormente quando l'utente è seduto in avanti sul cuscino e potrebbe non coprire l'intera superficie. Invece di intrecciare i tubi in una configurazione a "W" attraverso 4 tasche, i tubi possono essere piegati nella posizione centrale "ovale" e le coppie di tubi possono essere intrecciate attraverso 2 tasche (formando una configurazione a "V"). Questo limita la dispersione dell'aria. (vedere pagina 14). Le modifiche alla configurazione sono responsabilità del prescrittore.

Ignite

SPLASH

Dreamline

WHEELCHAIR SEATING

Woven Air

snooza



Quality Assurance

Rolapal Ltd is an ISO 9001, 14001 & 45001 certified company!



SEDUTA PER SEDIA A ROTELLE

by

ROLAPAL



Dr Dreamline

Check out our "How to"
Videos Pages



Prodotto da:



ROLAPAL Ltd

14 Marphona Crescent, Takanini 2105 Auckland, Nuova
Zelanda

E-mail: info@rolapal.co.nz

Sito web: www.rolapal.co.nz

EC

REP

BEO MedConsulting Berlin GmbH

Helmholtzstraße 2–9, D-10587 Berlino

