

s-max

IL MONTASCALE A RUOTE PER CARROZZINA CONFORTEVOLE E SICURO SU OGNI SCALINO

Applicato alla carrozzina permette di affrontare qualsiasi tipo di scala interna, esterna o a chiocciola, senza sforzo. Il sensore dell'innovativo sistema di avanzamento rileva la fine dello scalino e attiva la frenata automatica rendendo sicura ogni scala. La velocità, regolabile in modo lineare, e le varie modalità di utilizzo, singolo scalino o continuo, sono facilmente gestibili. Possibile sovvenzione da parte del Sistema Sanitario.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Elevata maneggevolezza e sicurezza / Spazio minimo di manovra 90 cm / Freno automatico / Aggancio rigido alla carrozzina / Compatto e leggero.

ACCESSORI:
P 082

MAGGIORI INFO SU:
medimec.it/s-max

DOTAZIONE

- GRUPPO PROPULSIVO CON FRENO AUTOMATICO
- CINTURA DI SICUREZZA
- DISPOSITIVO DI AGGANCIAMENTO ALLA CARROZZINA
- SMART STEP 2.0 PER RIDURRE LE SOLLECITAZIONI E LUCE AUSILIARIA
- BATTERIE SIGILLATE AL GEL-PIOMBO
- CARICA BATTERIE ELETTRONICO AUTOMATICO
- CHIAVE DI SICUREZZA E STOP DI EMERGENZA
- ARTICOLO A NORMA CE. CERTIFICATO ISO, BE, QVH, TUV
- ISTRUZIONE ALL'USO

ASSISTENZA
TECNICA

SERVIZIO
NOLEGGIO

VEDI ANCHE QUESTI ARTICOLI:
PP 070 - 080

IL COMANDO ERGONOMICO CONTROLLA TUTTE LE FUNZIONI




LA VERSIONE MAGGIORATA PERMETTE L'UTILIZZO FINO A 160 KG DI PESO TOTALE TRA UTENTE E CARROZZINA



PIÙ AUTONOMIA PER UNA QUALITÀ DELLA VITA SUPERIORE



DUE LUCI LED ILLUMINANO LA SCALA AIUTANDO NELL'IMPIEGO IN AMBIENTI POCO ILLUMINATI

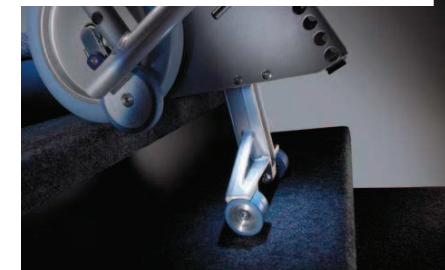

IL MANUBRIO ERGONOMICO RENDE LE OPERAZIONI DI SALITA E DI DISCESA COMODE E SICURE

IL SISTEMA DI RECUPERO ENERGIA ASSICURA DI NON RIMANERE BLOCCATI SULLA SCALA SE LA BATTERIA SI ESAURISCE

LE RUOTE IN GOMMA PIENA POSSONO ESSERE UTILIZZATE SIA SU SCALE AL CHIUSO SENZA DANNEGGIARLE CHE SU SCALE ALL'ESTERNO

ALTA COMPATIBILITÀ CON LA MAGGIORANZA DELLE CARROZZINE IN COMMERCIO

SMART STEP 2.0 RIDUCE LE SOLLECITAZIONI E LE VIBRAZIONI DURANTE L'UTILIZZO

IL COMANDO OSPITA TASTI E INDICATORI INTUITIVI PER GESTIRE LE DIVERSE MODALITÀ DI GUIDA ED È INOLTRE FORNITO DEL DISPOSITIVO DI STOP DI EMERGENZA

MANIGLIA REGOLABILE IN ALTEZZA

LA STAFFA DI APOGGIO SI MUOVE SU UN AMMORTIZZATORE EVITANDO BRUSCHI COLPI E DONANDO COMFORT ALL'UTENTE

POSSIBILITÀ DI USARE LA CARROZZINA MANUALMENTE ANCHE CON IL MONTASCALE AGGANCIATO

SENSORI PER LA FRENATA SUL BORDO DELLO SCALINO



UN ARTICOLO AAT ALBER. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ: A NORMA CE. CERTIFICAZIONE: ISO; BE; QVH; TUV. GARANZIA: ARTICOLO 2 ANNI (PER LE PARTI NON SOGGETTE AD USURA); BATTERIE 6 MESI.



DATI TECNICI	S-MAX 135 KG	S-MAX 160 KG
PORTATA MAX UTENTE + CARROZZINA	135 KG	160 KG
H TOTALE MIN - MAX	115 - 135 CM	120 - 165 CM
DIMENSIONE MIN SEDUTA CARROZZINA	VARIABILE A SECONDA DEL MODELLO	
VELOCITÀ MIN - MAX*	5 - 20 SCALINI AL MINUTO	8 - 23 SCALINI AL MINUTO
RAGGIO DI STERZATA MIN	90 CM A SECONDA DELLA CARROZZINA	
H SCALINO SUPERABILE FINO A	22 CM / 23,5 CM (SU RICHIESTA)	
FUNZIONE SMART STEP 2.0	SI	
LUCE LED AUSILIARIA	SI	NO
AUTONOMIA CON UNA CARICA FINO A	15 - 20 PIANI (CIRCA 300 SCALINI)	
PESO / TIPO PACCO BATTERIA	3 KG / 2 x 12 V, 3,3 AH, GEL-PIOMBO	
PESO / TIPO PROPULSORE	15,8 KG / 24 V, 200 W, DC	16,9 KG / 24 V, 275 W, DC
PESO TOTALE	22 KG	23,1 KG

LEGENDA: L = LARGHEZZA; P = PROFONDITÀ; H = ALTEZZA; ANT = ANTERIORE; POS = POSTERIORE; MAX = MASSIMO; MIN = MINIMO; MAN = MANUALE; ELE = ELETTRONICO. TOLLERANZE ± 1,5 CM. * VELOCITÀ REGOLABILE IN MODO LINEARE. ATTENZIONE: LA DITTA PRODUTTRICE SI RISERVA CAMBIAMENTI TECNICI E/O ESTETICI SENZA PREAVVISO. È ASSOLUTAMENTE NECESSARIO RISPETTARE LE INDICAZIONI DI SICUREZZA DEL COSTRUTTORE.