

KayserBetten



Letti di cura per bambini



Letti speciali per persone speciali

Due amministratori delegati – Una visione: Torsten Kappenberg e Peter Kayser sviluppano prodotti personalizzabili per persone con bisogni speciali.




ESPERIENZA ED INNOVAZIONE

Le persone speciali meritano letti speciali – Letti che corrispondano alle loro esigenze individuali. Noi di KayserBetten li costruiamo!!

Per bambini e adolescenti con bisogni sanitari complessi o disabilità, il letto non è solo un posto in cui dormire. È anche un luogo dove possono riposarsi, giocare o “ricaricare le batterie”. Alcuni di questi bambini trascorrono anche molto tempo a letto durante il giorno, sia per la terapia che il gioco. Le esigenze del lettino sono altrettanto speciali e individuali per le persone che prestano assistenza. Da oltre 35 anni produciamo lettini innovativi. Comfort, sicurezza e sostenibilità sono i fattori più importanti da considerare. Abbiamo il desiderio di trovare la soluzione giusta per ogni bambino. Non importa se su richiesta, sono disponibili modifiche per letti inclinati, imbottiture speciali o mobili laterali in legno di faggio abbinato. In oltre 100 versioni diverse, produciamo i nostri letti di cura in diverse dimensioni, altezze e colori con la possibilità di inserire reti

ortopediche con la regolazione elettrica dell'altezza da terra e la regolazione della superficie di sdraio. Entrambe le funzioni rendono la cura quotidiana molto più semplice e rispettosa della schiena per le persone che assistono i bambini nella vita di tutti i giorni. Progettiamo le porte, i sistemi di accesso ed uscita e le sponde laterali in modo tale da ridurre tutti i pericoli. In questo modo, anche le capacità motorie dei bambini e dei ragazzi possono svilupparsi o migliorare con il lettino per l'assistenza di KayserBetten. Il nostro team di circa 50 dipendenti ti aiuterà a trovare il modello ideale e saremo sempre disponibili a rispondere alle vostre domande anche dopo aver acquistato un letto da noi. Non vediamo l'ora di incontrarti e di vedere come possiamo aiutarti.

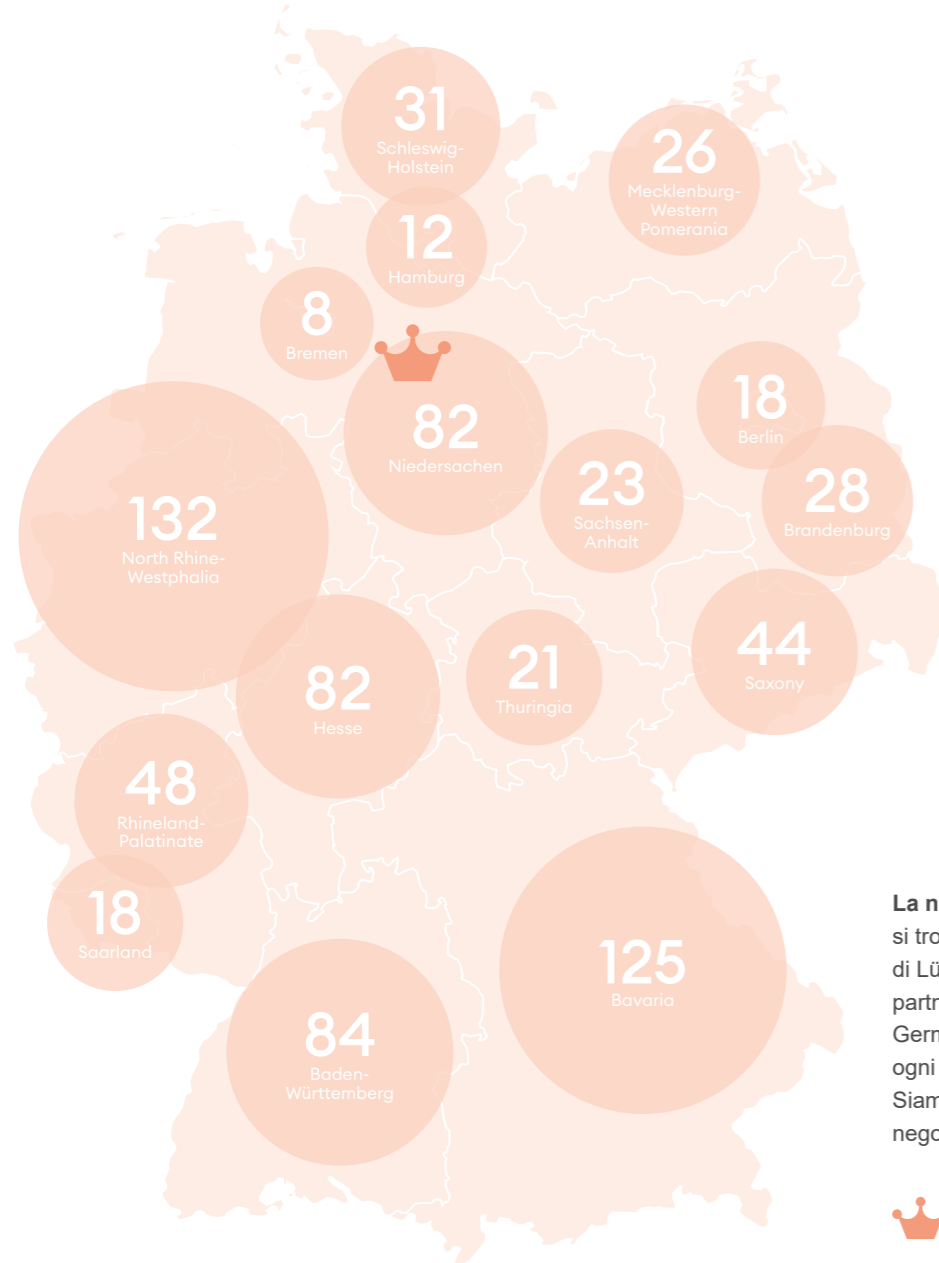

La nostra sede

si trova nel sud-ovest della brughiera di Lüneburg. Grazie a oltre 782 partner di cooperazione in tutta la Germania, siamo a tua disposizione ogni volta che hai bisogno di noi. Siamo felici di aiutarti a scegliere il negozio di forniture mediche giusto!




“SONO GLI INCONTRI
CON PERSONE
SPECIALI CHE
RENDONO IL NOSTRO
LAVORO COSÌ
APPAGANTE.”

TORSTEN KAPPENBERG
Managing Director

I lettini per l'assistenza di KayserBetten offrono uno spazio per riposare, dormire e giocare. Progettati e prodotti nel mezzo della bellissima brughiera di Lüneburg, diamo grande importanza alla sostenibilità.



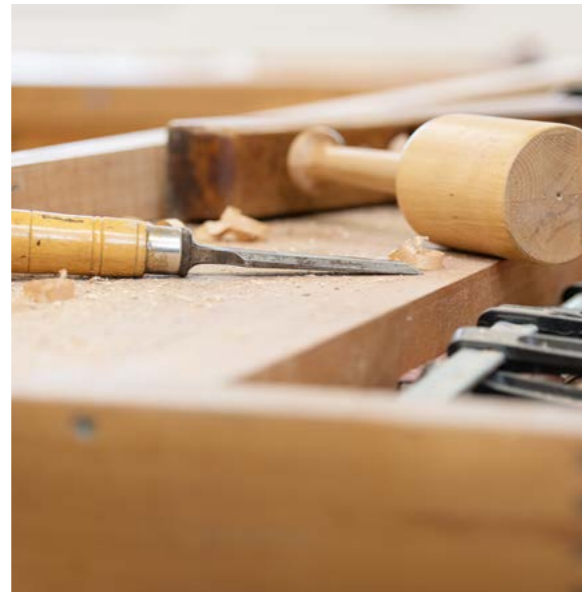

PRODUZIONE E QUALITÀ

Legno di faggio proveniente da foreste gestite in modo sostenibile, falegnameria tradizionale e tecnologia all'avanguardia: abbiamo criteri rigorosi per garantire la qualità di tutti i prodotti KayserBetten: sia per i materiali che per i fornitori e i processi di lavoro.



Materiali sostenibili

Il materiale base di tutti i nostri letti è il legno di faggio. Si tratta di un legno nazionale proveniente da foreste gestite e certificate in modo sostenibile. È estremamente durevole e stabile. E anche le considerazioni ambientali hanno la massima priorità durante la lavorazione.



Fornitori locali

Ci concentriamo su standard di qualità elevati e costanti. Per noi è quindi importante promuovere la cooperazione a lungo termine con, ove possibile, i partner regionali. Attraverso l'organizzazione no-profit Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V. coinvolgiamo le persone con disabilità nel processo di produzione.



Artigianato e innovazione

Attraverso un'attenta lavorazione artigianale e l'utilizzo di materiali di alta qualità, possiamo garantire la massima stabilità, sicurezza e durata. I nostri metodi di produzione combinano la falegnameria tradizionale con la tecnologia più avanzata. Qui l'esperienza incontra l'innovazione.



I nostri dipendenti

I nostri dipendenti svolgono un ruolo decisivo: la realizzazione dei nostri obiettivi aziendali. Apprezziamo un ambiente di lavoro positivo e sano. Ciò include: orari di lavoro flessibili, opportunità di formazione e sviluppo e promozione dello sviluppo personale.

Vetro acrilico

I vetri in vetro acrilico consentono al bambino l'accesso visivo all'ambiente circostante.

Vetro acrilico colorato (opzionale)

I motivi di animali stampati aumentano l'accettazione del letto e favoriscono la percezione visiva.

Finitura in vernice colorata (opzionale)

Scegli una finitura in vernice colorata per stimolare la percezione visiva e l'immaginazione.

Trattamento del legno resistente al sudore e alla saliva

(secondo la normativa DIN 71-3 per i giocattoli per bambini)

Legno massello di faggio

Il legno massello trattato, morbido e vellutato, è caldo e corrisponde alle sensazioni fisiologiche dei bambini.

La regolazione in altezza consente la terapia/assistenza senza sforzi alla schiena da parte dell'operatore



Il mio KayserBett (opzionale)
Dai al tuo letto un design cromatico personalizzato utilizzando profili e imbottiture colorati sui lati lunghi. Senza sovrapprezzo!

Ruote (opzionali)
Il letto è mobile e può essere utilizzato con un sollevatore.

Accessori funzionali

Per tutti i nostri letti è disponibile un'ampia gamma di accessori funzionali: dai vari materassi ai baldacchini.

Reti ortopediche

Che si tratti di una base in legno massiccio o di una base con regolazione completa dell'altezza, della superficie di appoggio e dell'altezza della testa, avete possibilità di fare la vostra scelta.

Resilienza

Con una portata fino a 150 kg, nel letto può sedersi una persona adulta insieme al bambino.

Progettazione del colore

Scegli dalla tabella colori la tua combinazione personalizzata.

→ Chiedi la cartella colori



→ www.kayserbetten.eu

SICUREZZA E QUALITÀ

In qualità di fabbricanti di dispositivi medici, produciamo i nostri letti per bambini nel rispetto dei requisiti fondamentali di sicurezza per i dispositivi medici come richiesto dal Regolamento Europeo sui dispositivi medici (UE) 2017/745 (MDR) e dai requisiti di qualità.

Abbiamo standard elevati per la sicurezza e la qualità dei nostri letti. Consapevoli della nostra responsabilità, per i nostri letti garantiamo di:

- evitare punti di pizzicamento e di presa
- utilizzare materiali sicuri per l'utente e per l'ambiente
- utilizzare materiali a lenta combustione
- utilizzare superfici in legno laccate con proprietà igieniche innocue per la salute.

Il nostro sistema di gestione della qualità, introdotto nel 2007, garantisce letti di cura per bambini sicuri e facili da usare, di alta qualità e conformi ai seguenti requisiti:

Dispositivi Medici

- **DIN EN 50637 Apparecchi elettromedicali Requisiti** particolari per la sicurezza, comprese le prestazioni essenziali, dei letti medici per bambini.
- **DIN EN 60601-2-52 Apparecchi elettromedicali Requisiti** particolari per la sicurezza, comprese le prestazioni essenziali, dei letti medici
- **DIN EN 60601-1 Apparecchi elettromedicali** Parte 1 Specifiche generali per la sicurezza
- **DIN EN 60601-1-11** Requisiti delle apparecchiature elettromedicali e dei sistemi elettromedicali per l'assistenza medica in ambiente domestico

La conformità ai requisiti standard indicati è verificata da Eurofins Product Service GmbH, testata e certificata come laboratorio di prova accreditato e organismo di certificazione per i mercati nazionali e internazionali.

Superficie

- **DIN 68861, 1B Superfici di mobili**
- Parte 1: Comportamento sotto stress chimico
- **DIN EN 71 Parte 3 Sicurezza dei giocattoli**
- **EN ISO 10993-1:2003 Valutazione biologica dei dispositivi medici – Biocompatibilità**

Gestione della qualità


- **DIN EN 13485 Dispositivi medici - Requisiti dei sistemi di gestione della qualità a fini normativi**
- **DIN EN 9001 Sistemi di Gestione della Qualità - Requisiti**
- **DIN EN 14001 Sistemi di Gestione Ambientale - Requisiti**





"Prevenzione delle cadute, prevenzione degli infortuni, facilità di entrata e uscita: pensiamo a tutto noi, così non dovrai farlo tu."

JENS LÜBBEN
Quality management

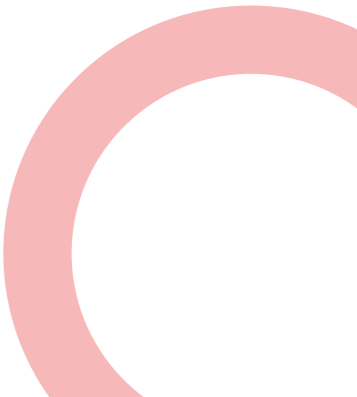



KayserBett

TIMMY

TIMMY è il letto ideale per bambini con bisogni complessi. Dotato di 4 sponde abbassabili, può essere utilizzato anche come panca terapeutica.

Per chi è adatto TIMMY?

Il letto KayserBett TIMMY è destinato ai bambini con bisogni assistenziali complessi come: tetraspasticità, ICP, ipotonia muscolare o tetraparesi. Grazie alla sua particolare costruzione, il letto di terapia intensiva è adatto anche a bambini e adolescenti con mobilità ridotta o che necessitano di cure speciali, come la ventilazione e l'alimentazione PEG.

Assistenza medica, terapia e infermieristica:

Il KayserBett TIMMY è disponibile in due versioni, che si differenziano per l'altezza delle sponde. TIMMY 1 ha sponde alte 65 cm e TIMMY 2 ha sponde alte 43 cm. In entrambe le versioni tutti e quattro i lati possono essere abbassati in più posizioni. Ciò significa che le procedure di allettamento possono essere eseguite anche accedendo dalla zona testa o piedi.

La regolazione dell'altezza tramite l'uso di una rete ortopedica con movimentazione elettrica fornisce l'altezza operativa ottimale, ergonomica e sicura per la terapia. I montanti rimovibili (opzione) consentono l'utilizzo come panca terapeutica. Tra gli accessori, disponibili supporti di aggancio con guide per il passaggio dei tubi per la ventilazione e l'alimentazione da installare sui profili del letto. Tutti i letti TIMMY possono essere dotati di ruote che ne permettono lo spostamento con facilità.

- Maneggevolezza grazie ai quattro lati abbassabili facili da azionare
- Adatto per cure mediche, terapie e assistenza da tutti i lati
- Compatibile con rete ortopedica regolabile elettricamente in altezza


VERSIONI

TIMMY è disponibile in due versioni con diverse altezze delle sponde


	Altezza sponda	Dimensioni interne	Dimensioni esterne	Totale altezza	Distanza tra bordo superiore materasso e altezza accesso
				più 7 cm testine colonne laterali	incl. ruote Ø 13.5 cm e materasso 10 cm
TIMMY 1	65 cm	140 x 70 cm	158 x 87 cm	132.5 cm	min. 76 cm - max. 116 cm
	65 cm	170 x 90 cm	188 x 107 cm	132.5 cm	min. 76 cm - max. 116 cm
	65 cm	200 x 90 cm	218 x 107 cm	132.5 cm	min. 76 cm - max. 116 cm
	65 cm	200 x 100 cm	218 x 117 cm	132.5 cm	min. 76 cm - max. 116 cm
TIMMY 2	43 cm	140 x 70 cm	158 x 87 cm	98.5 cm	min. 64 cm - max. 104 cm
	43 cm	170 x 90 cm	188 x 107 cm	98.5 cm	min. 64 cm - max. 104 cm
	43 cm	200 x 90 cm	218 x 107 cm	98.5 cm	min. 64 cm - max. 104 cm
	43 cm	200 x 100 cm	218 x 117 cm	98.5 cm	min. 64 cm - max. 104 cm

RETI ORTOPEDICHE CONSIGLIATE


I letti TIMMY, se dotati di rete con regolazione elettrica dell'altezza, consentono agli assistenti di fornire assistenza con un rischio ridotto di lesioni.

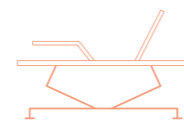

KR5 Regol. elettrica altezza, collo, schiena, gambe e ginocchia

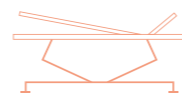

KR6 Regol. elettrica altezza + Regol. manuale collo e gambe

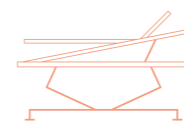

KR7 Regol. elettrica altezza e Antitrendelenburg + Regol. manuale collo e gambe



KR8 Regol. elettrica altezza, Antitrendelenburg, collo, schiena, gambe e ginocchia

TIMMY 1



naturale

TIMMY 2



naturale



colorato



colorato



trasparente



trasparente



My TIMMY 1



My TIMMY 2



KayserBett

HANNAH

KayserBetten HANNAH offre uno spazio sicuro a bambini molto attivi – con sponde laterali fino a 170 cm di altezza.

Per chi è adatto HANNAH? KayserBetten HANNAH è adatto a bambini molto attivi. È molto robusto e costruito per garantire uno spazio sicuro e confortevole anche ai bambini più attivi. Hannah è disponibile con sponde extra alte per la massima sicurezza fornendo al tempo stesso un facile accesso a coloro che, nonostante necessità particolari, possono trasferirsi autonomamente.

Versioni:

HANNAH è disponibile con quattro diverse altezze di sponde: 70 cm, 98 cm, 135 cm e 170 cm e con quattro porte su un solo lato lungo (disponibile su richiesta con 8 porte per consentire l'accesso da entrambi i lati lunghi). Compatibile con la rete ortopedica a movimentazione elettrica in altezza (intervallo di regolazione da 55 a 95 cm).

Un sistema di bloccaggio esterno delle porte e una barra di bloccaggio aggiuntiva (accessorio) impediscono l'apertura forzata delle porte. Se necessario, il materasso può essere fornito con un rivestimento in pelle sintetica saldamente cucita, che garantisce ulteriore sicurezza.

- Disponibile con quattro altezze di sponde laterali: 70 cm, 98 cm, 135 cm e 170 cm
- Accessori funzionali come imbottiture interne complete o parziali, copertura completa/parziale in vetro acrilico dei listelli delle porte
- Costruzione robusta e stabile
- Particolarmente adatto per bambini molto attivi

VERSIONI

HANNAH è disponibile in quattro versioni con diverse altezze di sponde

	Altezza porte	Dimensioni interne	Dimensioni esterne	Altezza totale	Bordo superiore del materasso all'altezza accesso
			incl. blocco porte esterno		più 7 cm testine colonne laterali
HANNAH 70	70 cm	170 x 90 cm	185 x 101 cm*	119 cm	min. 55 cm - max. 95 cm
		200 x 90 cm	215 x 101 cm*	119 cm	min. 55 cm - max. 95 cm
		200 x 100 cm	215 x 111 cm*	119 cm	min. 55 cm - max. 95 cm
HANNAH 98	98 cm	170 x 90 cm	185 x 108.7 cm	147 cm	min. 55 cm - max. 95 cm
		200 x 90 cm	215 x 108.7 cm	147 cm	min. 55 cm - max. 95 cm
		200 x 100 cm	215 x 118.7 cm	147 cm	min. 55 cm - max. 95 cm
HANNAH 135	135 cm	170 x 90 cm	185 x 108.7 cm	184 cm	min. 55 cm - max. 95 cm
		200 x 90 cm	215 x 108.7 cm	184 cm	min. 55 cm - max. 95 cm
		200 x 100 cm	215 x 118.7 cm	184 cm	min. 55 cm - max. 95 cm
HANNAH 170	170 cm	170 x 90 cm	185 x 108.7 cm	220 cm	min. 55 cm - max. 95 cm
		200 x 90 cm	215 x 108.7 cm	220 cm	min. 55 cm - max. 95 cm
		200 x 100 cm	215 x 118.7 cm	220 cm	min. 55 cm - max. 95 cm

*HANNAH 70 non è dotato di dispositivo di sicurezza sulla porta esterna.

Versioni HANNAH con porte e sponde laterali di diverse altezze



RETI ORTOPEDICHE CONSIGLIATE

Hannah può essere fornita con reti ortopediche elettriche e regolabili in altezza e o con rete a doghe rigida. Sono disponibili reti ortopediche solide per gli utenti che mostrano comportamenti problematici per i quali non è necessaria una piattaforma elettrica.

Piano robusto in legno per maggiore stabilità

KR1 Semplice telaio senza opzioni di regolazione




KR2 Regol. manuale collo e gambe



KR3 Regol. elettrica collo, schiena, gambe e ginocchia




KR5 Regol.elettrica altezza, collo, schiena, gambe e ginocchia

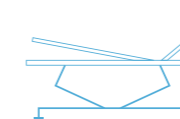

KR6 Regol. elettrica altezza + Regol. manuale collo e gambe



KR7 Regol.elettrica altezza e Antitrendelenburg + Regol. manuale collo e gambe

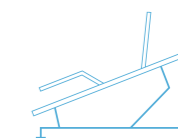

KR8 Regol.elettrica altezza, Antitrendelenburg, collo, schiena, gambe e ginocchia

La giusta imbottitura del letto aiuta a garantire un ambiente sicuro. Un sonno sicuro per il bambino significa un sonno tranquillo per i genitori.



IMBOTTITURE PER LA MASSIMA SICUREZZA

Imbottiture diverse per esigenze diverse: sei tu a scegliere l'altezza, il colore, il tipo di montaggio e il materiale.

L'imbottitura delle culle e dei letti di cura può proteggere efficacemente il bambino da autolesioni in caso di attività motoria incontrollata. Se necessario, avete la possibilità di dotare di imbottitura ciascuno dei nostri letti.

Attrezzatura

Sia che siano imbottiti tutti e quattro i lati del letto o solo i singoli segmenti, potete scegliere diverse altezze di imbottitura e tessuti/colori: siete voi a scegliere la dotazione in base alle esigenze individuali del vostro bambino.

Fissaggio

L'imbottitura è fissata con velcro e può essere facilmente rimossa per la pulizia. Per un fissaggio permanente, l'imbottitura può essere montata su una piastra e avvitata saldamente al giroletto. Per il fissaggio con bulloni vengono utilizzati un pannello rigido (15 mm) e un Polylam (15 mm) con tessuto in pelle artificiale.




Tessuto

Usiamo Polylam (28 mm) come tessuto da rivestimento. Si tratta di un rivestimento con cerniera in pelle sintetica resistente al sudore e alla saliva. Disponibile in alternativa, rivestimento in nylon resistente "NEVO" o in speciale telone robusto (Tarpaulin).




Scegli il tuo colore preferito:

→ tutti i colori sono mostrati a pagina 98

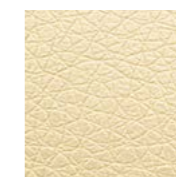

Pelle sintetica

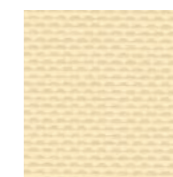

NEVO



Tarpaulin

OPZIONI DI IMBOTTITURA

Con o senza finestra, fino ai bordi superiori oppure no: ci sono diverse opzioni per il tipo di imbottitura. Saremo felici di aiutarvi a trovare l'opzione giusta e possiamo darvi consigli riguardo all'installazione di sistemi di ventilazione/alimentazione PEG.



HANNAH

Imbottitura standard

Abbiamo una serie di opzioni per gli stili di riempimento. Potrai scegliere tu stesso l'altezza dell'imbottitura e il tessuto più adatto al tuo bambino, selezionando anche il colore preferito tra un'ampia gamma. Se hai esigenze particolari riguardo ai tipi di tessuto, contattaci.



OLAF

Finestre e porte

L'imbottitura è disponibile con intagli per finestre nella zona della porta. Questi consentono il contatto visivo con il bambino. Gli intagli sono realizzati in Makrolon e vetro acrilico. Se è necessaria l'imbottitura con gli intagli per le finestre, si consiglia di montare l'imbottitura su una piastra fissa imbullonata invece di utilizzare il velcro.



TIMMY

Imbottitura con sponde abbassabili e reti ortopediche con movimentazione regolabile:

Per abbassare le sponde laterali è necessario rimuovere l'imbottitura. Per movimentare la rete ortopedica invece, l'imbottitura può rimanere al suo posto.



EMMA

Imbottitura sul bordo superiore

Le imbottiture sui bordi superiori proteggono i bambini e i ragazzi da lesioni che potrebbero derivare da movimenti incontrollabili.



Ventilazione

È necessario mantenere sempre una ventilazione sufficiente all'interno del letto. Saremo lieti di consigliarvi se è necessaria un'imbottitura completa, tenendo conto delle esigenze di spazio nella camera da letto – insieme troveremo la soluzione migliore per le vostre esigenze individuali.



Se avete domande sull'imbottitura, non esitate a contattare il nostro servizio di consulenza.

ACCESSORI – SU MISURA PER LE VOSTRE RICHIESTE

Otteni il massimo dal tuo letto KayserBetten:
scopri le nostre opzioni accessorie in cinque aree chiave.

Per avere ulteriori opzioni di cura e terapia, o per avere maggior sicurezza o semplicemente per scopi decorativi, i nostri accessori rendono il tuo letto esattamente come lo desideri.

Per la cura ottimale

A seconda del tipo di terapia o di cure di cui il tuo bambino ha bisogno, accessori come i montanti rimovibili, un materassino terapeutico o un fasciatoio regolabile possono semplificarti la vita di tutti i giorni.

Per una sicurezza ancora maggiore

I bambini molto attivi spesso necessitano di misure di sicurezza individuali. Offriamo diverse opzioni come protezione antifuga, staffe a parete, protezione per porte esterne e molto altro.

Per una maggiore mobilità

Sono disponibili numerose opzioni per stimolare a entrare e uscire da un letto KayserBetten. Queste aiutano anche a promuovere la mobilità del tuo bambino nel modo più sicuro.

Per l'ambiente giusto

Dai baldacchini ai cassetti del letto: i nostri accessori offrono anche opzioni sia per scopi decorativi che pratici.

Per cure mediche

Se cavi e/o tubi sono essenziali questi vanno gestiti in modo pratico e sicuro. I nostri accessori garantiscono, ad esempio, che non rimangano intrappolati nelle porte o che la funzione delle sponde abbassabili non venga compromessa.

PER LA CURA OTTIMALE

Se un letto non serve solo per far dormire il tuo bambino, ma anche come luogo di cura e terapia, i seguenti accessori renderanno più semplice la tua vita quotidiana.



Montanti rimovibili
I montanti rimovibili forniscono una superficie liberamente accessibile per l'esecuzione delle terapie.

Tappetino terapeutico
Una tavola multiplex con rivestimento in schiuma e similpelle offre una solida base per la terapia.

Piedini per montanti
Tramite sostituzione delle ruote se queste non sono richieste.

Il fasciatoio può essere agganciato al lato del lettino. Questo permette l'assistenza anche dal lato lungo. Pieghevole, necessita di pochissimo spazio per essere riposto.

ANCORA PIU' SICUREZZA

Una maggiore stabilità del letto e una protezione aggiuntiva per evitare la fuga: con i seguenti accessori offriamo la massima sicurezza, di cui spesso i bambini molto attivi hanno bisogno.


Copri-listelli in acrilico/rete

Per evitare che i bambini possano infilarsi o rimanere incastrati tra le sbarre, sono disponibili coperture protettive in acrilico o in rete. L'acrilico è particolarmente indicato per lettini con porte o con sponde abbassabili, la rete è utilizzabile solo su lettini con sponde abbassabili.

Protezione antifuga

La nostra protezione antifuga impedisce al bambino di arrampicarsi e scavalcare le sponde - disponibile in tre diverse versioni.


Protezioni antifuga

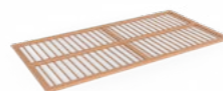

Protezione antifuga a barre
Classica versione con barre



Protezione antifuga a rete
Con tessuto a rete leggero

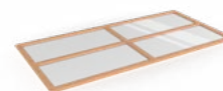

Protezione antifuga in acrilico
Con vetro acrilico



Protezione anti-ribaltamento del letto

Dona ulteriore stabilità al letto. Indicato per bambini molto attivi, sia come sicurezza aggiuntiva che in alternativa al montaggio del sistema di aggancio a parete.

Tavola di sicurezza

Utilizzabile su tutti i letti con porte per stabilizzare la chiusura delle ante nella zona inferiore.

Sistema di blocco delle porte

Conferisce ulteriore stabilità alle ante, non possono essere né spinte verso l'esterno né tirate verso l'interno.

Estensione delle sponde Per riempire lo spazio dal letto al soffitto.

Cinghie in similpelle Per il fissaggio delle porte aperte.

Sistema di fissaggio al muro del letto Utilizzato per fissare il letto alla parete.

Scatola contenitiva per pulsantiera e comandi (con o senza guida per cavi)

Scatola contenitiva per l'installazione sicura all'esterno del letto della pulsantiera e dei comandi (ad es. regolazione motorizzata del piano rete).



Sovrasponda per EMMA 2

Sovrasponda, che si può installare anche in un secondo momento, quando diventa necessaria una protezione aggiuntiva in seguito allo sviluppo delle capacità motorie del bambino.

PER UNA MAGGIORE MOBILITA'

Le funzioni motorie dei bambini differiscono molto. Pertanto, i nostri diversi ausili per l'accesso non solo aiutano il bambino ad entrare e uscire dal letto, ma aiutano anche a stimolarne lo sviluppo.



Barra a trapezio
Include una maniglia per il posizionamento indipendente da sdraiati.



EMMA

Ruotine piroettanti
Le ruote alte rendono il letto più mobile e accessibile con un sollevatore.

Supporti per l'accesso
Interazione giocosa quando si scivola o si gattona.



ADATTABILE ALL'AMBIENTE

Noi di KayserBetten ci concentriamo sempre sulla funzionalità e sulla sicurezza. Ma l'ergonomia e il design sono ugualmente importanti e possiamo fornire accessori decorativi e pratici per tutti i gusti.



HANNAH

Baldacchino

A portata di mano: offriamo un baldacchino in tessuto per decorare il letto. Si prega di notare l'altezza di installazione di ca. 88cm.

Cassetto sottoletto Tanto spazio per riporre gli oggetti: i nostri cassetti sottoletto sono montati su piccole rotelle e possono essere spostati individualmente sotto il letto.

Struttura in legno smontabile / In alternativa al tettuccio in tessuto.



TIMMY

Piede per stabilità

Più stabilità: un'alternativa alle ruote piroettanti è disponibile un piede fisso – solo per IDA ed EMMA.

Tavolino

Abbinato al letto: Il tavolino laterale è un utile appoggio (ad esempio le apparecchiature mediche) ed è dotato di ruote (dimensioni: 50 x 50 x 70 cm).



**Portafebo /
supporto giocattoli**
Utilizza il supporto per
infusione per fissare
giocattoli o un cellulare.

PER LE CURE MEDICHE

A seconda del modello di letto richiesto e delle condizioni di salute del bambino, i nostri accessori per l'assistenza medica offrono la massima funzionalità.



Ripiano portaoggetti
Fissabile sul lato corto del
letto, pratico per qualsiasi
attrezzatura medica.

**Montanti con guida per il
passaggio di tubi per letti
con porte** Evita che i tubi
vengano schiacciati tra le
porte.

**Montanti con guida per il
passaggio di tubi per letti con
sponde abbassabili** Consente la
movimentazione sicura delle
sponde laterali
(TIMMY o EMMA 2).

**Portafebo/supporto
giochi** Peso massimo
7,5 kg

DISPONIBILITA' ACCESSORI

La maggior parte degli accessori sono disponibili in tutta la gamma, ma ci sono alcune eccezioni: la tabella seguente ne fornisce una panoramica. Non riesci a trovare l'accessorio giusto? Contattaci per soluzioni individuali.

	Cura e terapia				massima sicurezza												
	Montanti removibili	Tappetino terapeutico	Fasciolo Agganciabile	Piedini per montanti	Tavola di sicurezza - serratura aggluniva	Sistema blocco porte	Protezione anti-fuga a barre	Protezione anti-fuga a rete	Protezione anti-fuga in acrilico	Coprilistelli in acrilico o rete	Sovraspanda	Estensione sponde	Sistema fissaggio al muro	Protezione antibattimento	Cinghie fissaggio porte in pelle sintetica	Scatola comando con passaggio cavi	Scatola comando senza passaggio cavi
TIMMY1	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	✓	x	x	✓	x	x	✓	✓
TIMMY1 Easy Lift	(✓)	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	✓	x	x	✓	x	x	✓	✓
TIMMY Teleskop	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	(✓)	x	x	✓	x	x	✓	✓
TIMMY 2	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	✓	x	x	✓	x	x	✓	✓
IDA	x	✓	x	x	✓	✓	x	x	x	✓	x	x	x	x	✓	✓	✓
EMMA 1	x	✓	x	x	✓	✓	x	x	x	✓	x	x	x	x	✓	✓	✓
EMMA 2	x	✓	x	x	x	x	x	x	x	✓	✓	x	x	x	✓	✓	✓
OLAF	x	✓	x	✓	✓	S ⁴⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓
HANNAH	x	✓	x	✓	✓	S ⁵⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓	x	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓	✓
TOBI	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	✓	x	x	x
LOTTE	x	✓	x	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	x	✓	✓	✓
Changing table	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Therapy bench	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Travel bed/ Playpen	x	✓	x	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	✓	x	✓	x	x

	massima mobilità			adattabilità all'ambiente					cure mediche			
	Barra a trapezio	Ruotine piroettanti	Supporto per l'accesso	Baldacchino in tessuto	Baldacchino in legno	Cassetti portaoggetti	Tavolino	Piede per stabilità	Ripiano portaoggetti	Scatola comandi con guida tubi - con sponde	Scatola comandi con guida tubi - con porte	Porta flebo/ supporto giochi
TIMMY1	✓	S	x	✓	✓	x	✓	x	✓	✓	x	✓
TIMMY1 Easy Lift	✓	S	x	✓	✓	x	✓	x	✓	✓	x	✓
TIMMY Teleskop	✓	S	x	✓	✓	x	✓	x	✓	✓	x	✓
TIMMY 2	✓	S	x	✓	✓	x	✓	x	✓	✓	x	✓
IDA	✓	S	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	x	✓	✓
EMMA 1	✓	S	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	x	✓	✓
EMMA 2	✓	S	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	x	✓
OLAF	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	x	✓	x	✓	✓
HANNAH	✓	✓	✓	✓	x	✓ ³⁾	✓	x	✓	x	✓	✓
TOBI	x	x	✓	x	x	x	✓	x	x	x	x	x
LOTTE	x	S	✓	✓	x	x	✓	x	x	x	x	✓
Changing table	x	S	x	x	x	x	✓	x	x	x	x	x
Therapy bench	x	S	x	x	x	x	✓	x	x	x	x	x
Travel bed/ Playpen	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x


S = standard ✓ = possibile (✓) = possibile con limitazioni x = non possibile

¹⁾ disponibile da 135 cm di altezza delle porte ²⁾ disponibile da 170 cm di altezza delle porte
³⁾ incompatibile con sollevatore ⁴⁾ da 170 cm di lunghezza ⁵⁾ da 98 cm di altezza delle porte


MATERASSI E FODERE PER OGNI SCOPO

I giusti materassi e le giuste fodere per il tuo letto

MATERASSI

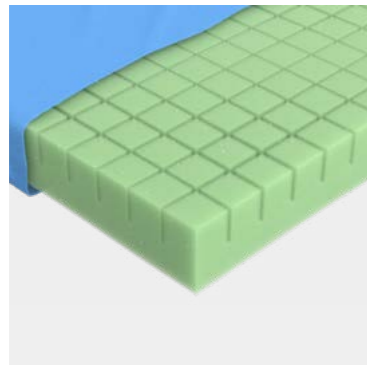


Materasso antidecubito KM2
Nucleo del materasso: schiuma PU RG 35
Altezza: 12 cm
Fodera: fodera interna in jersey e fodera esterna in jersey elasticizzato - lavabile fino a 60°C
I cubetti di questo speciale materasso consentono una ridistribuzione ottimale del peso corporeo su una "grande superficie" per ridurre al minimo i punti di pressione. Allo stesso tempo la forma cubica consente il necessario scambio di temperatura e umidità.

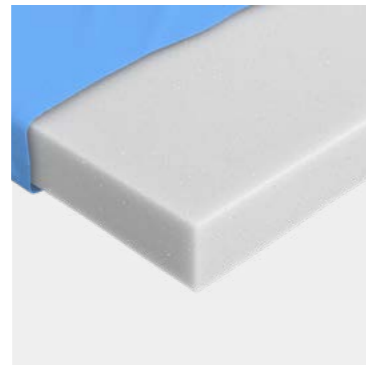


Materasso in schiuma KM3
Nucleo del materasso: schiuma PU RG 35
Altezza: 10 cm
Fodera: tessuto di cotone elastico - lavabile fino a 60°C
Materasso standard per tutte le piattaforme letto.



Materasso in schiuma KM4
con fodera cucita saldamente
Nucleo del materasso: schiuma PU RG 35
Altezza: 10 cm
Fodera: similpelle, tessuto NEVO o telone per camion
La fodera può essere pulita con un panno umido. Il materasso in schiuma ha una copertura saldamente cucita.

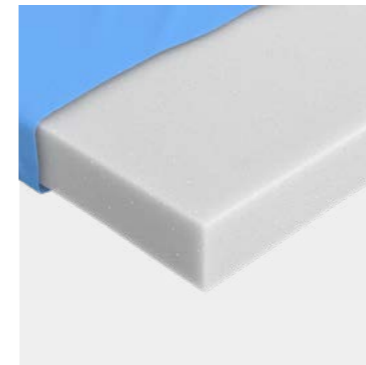

Materasso in schiuma morbida KM5
Nucleo del materasso: schiuma PU RG 28/30
Altezza: 10 cm
Rivestimento: tessuto di cotone - lavabile fino a 60°C
Materasso standard per i pazienti con un peso corporeo ridotto.

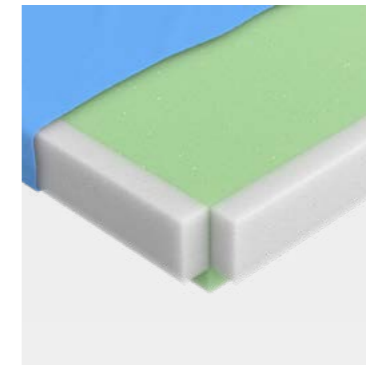

Materasso KM6 con angoli smussati
Nucleo del materasso: schiuma PU RG 35
Altezza: 10 cm
Fodera: tessuto di cotone - lavabile fino a 60°C
I profili in aggiunta sul materasso si estendono dai bordi del letto fino alle sponde laterali.




Materasso in schiuma fredda KM7
Nucleo del materasso: schiuma fredda RG 40
Altezza: 12 cm
Fodera: TREVIRA-CS® - lavabile fino a 95°C
Il materasso traspirante in schiuma fredda garantisce una ventilazione ottimale e sostiene il corpo.

FODERE



Fodera impermeabile
Fodera in morbido PVC
Altezza: 12 cm
Fodera lavabile fino a 95°C
La fodera per incontinenza antistrappo protegge il materasso dallo sporco e dal bagnato

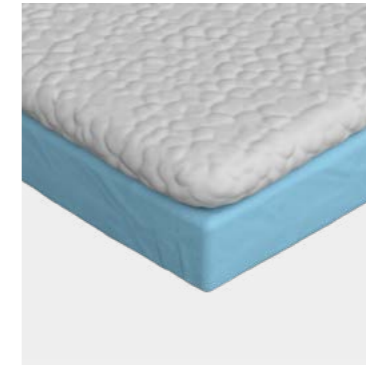

Imbottitura in schiuma viscoelastica
Materiale: schiuma viscoelastica
Altezza: 4 cm
Fodera lavabile fino a 60°C
L'imbottitura reagisce al calore e al peso corporeo con una maggiore redistribuzione della pressione.

Utilizza il configuratore KayserBetten per configurare il tuo letto personale con il materasso e la fodera abbinati.
→ [kayserbetten.eu](https://www.kayserbetten.eu)

RETI ORTOPEDICHE PER LA MIGLIORE POSIZIONE SDRAIATA

Scegli tra 10 diversi telai, che differiscono tutti per la regolabilità dei singoli elementi.

Dimensioni standard

140x70 cm, 170x90 cm, 200x90 cm, 200x100 cm. Alcuni modelli possono essere realizzati fino alla dimensione di 220 x 160 cm.

Nota

La struttura in legno **molleggiato** è curvata nel mezzo. I bambini con peso ridotto non saranno in grado di spingere questa piattaforma piatta: ti consigliamo di contattarci per discutere opzioni alternative.



Saremo felici per consigliarvi sulla scelta della piattaforma giusta.

→ Telephone: +49 5163 6595



KR8 Altezza, elevazione della testa e distensione superficie regolabile a motore




Piano rigido in legno per maggiore stabilità e buona ventilazione



KR1 Semplice telaio senza opzioni di regolazione



KR2 Regol. manuale collo e gambe

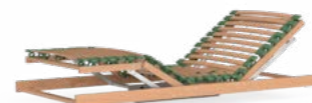

KR3 Regol. elettrica collo, schiena, gambe e ginocchia




KR5 Regol.elettrica altezza, collo, schiena, gambe e ginocchia




KR6 Regol. elettrica altezza + Regol. manuale collo e gambe



KR7 Regol. manuale collo e gambe + Regol.elettrica altezza e antitrendelenburg


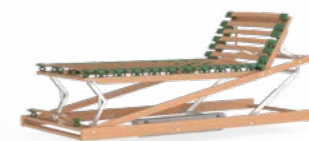


KR11 Regol. manuale collo e gambe + Regol. elettrica antitrendelenburg

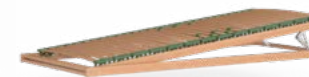

KR12 Elevazione della testa regolabile manualmente

Non vediamo l'ora di ascoltare la tua storia personale e fare in modo che la nostra missione sia creare il letto perfetto per il tuo bambino.

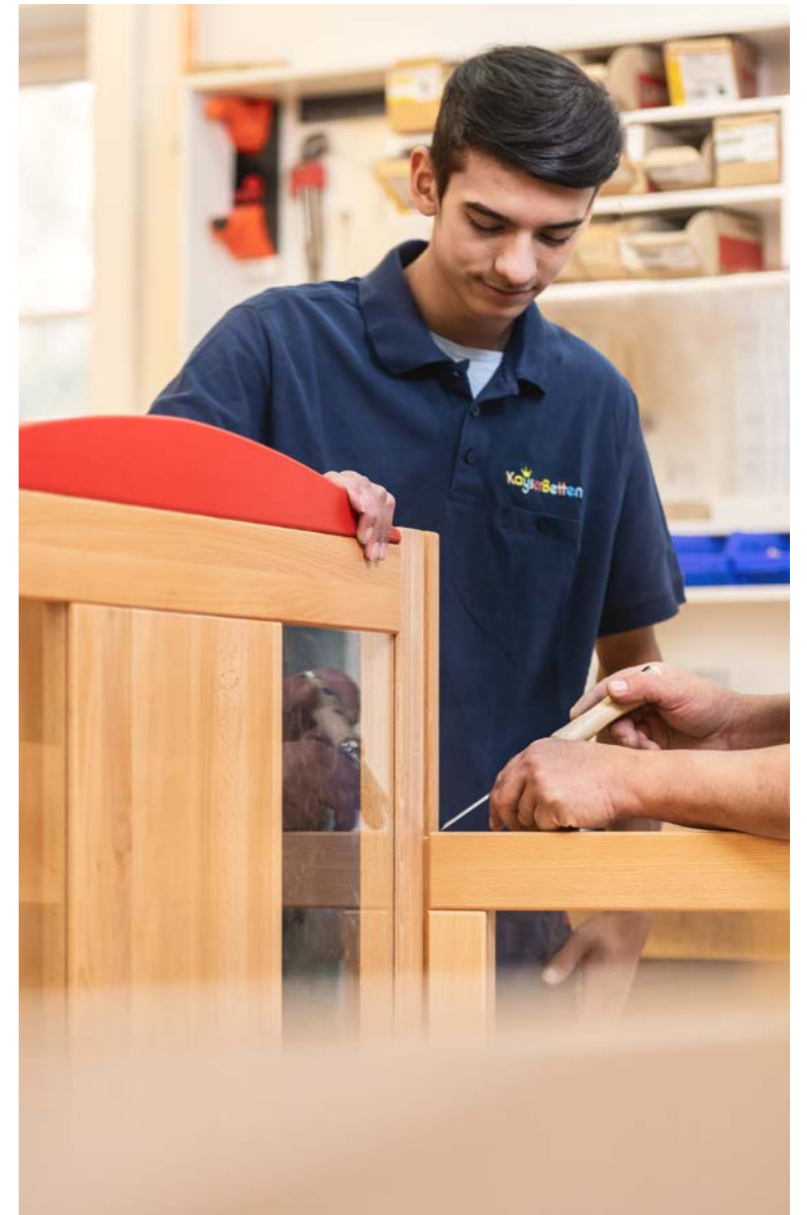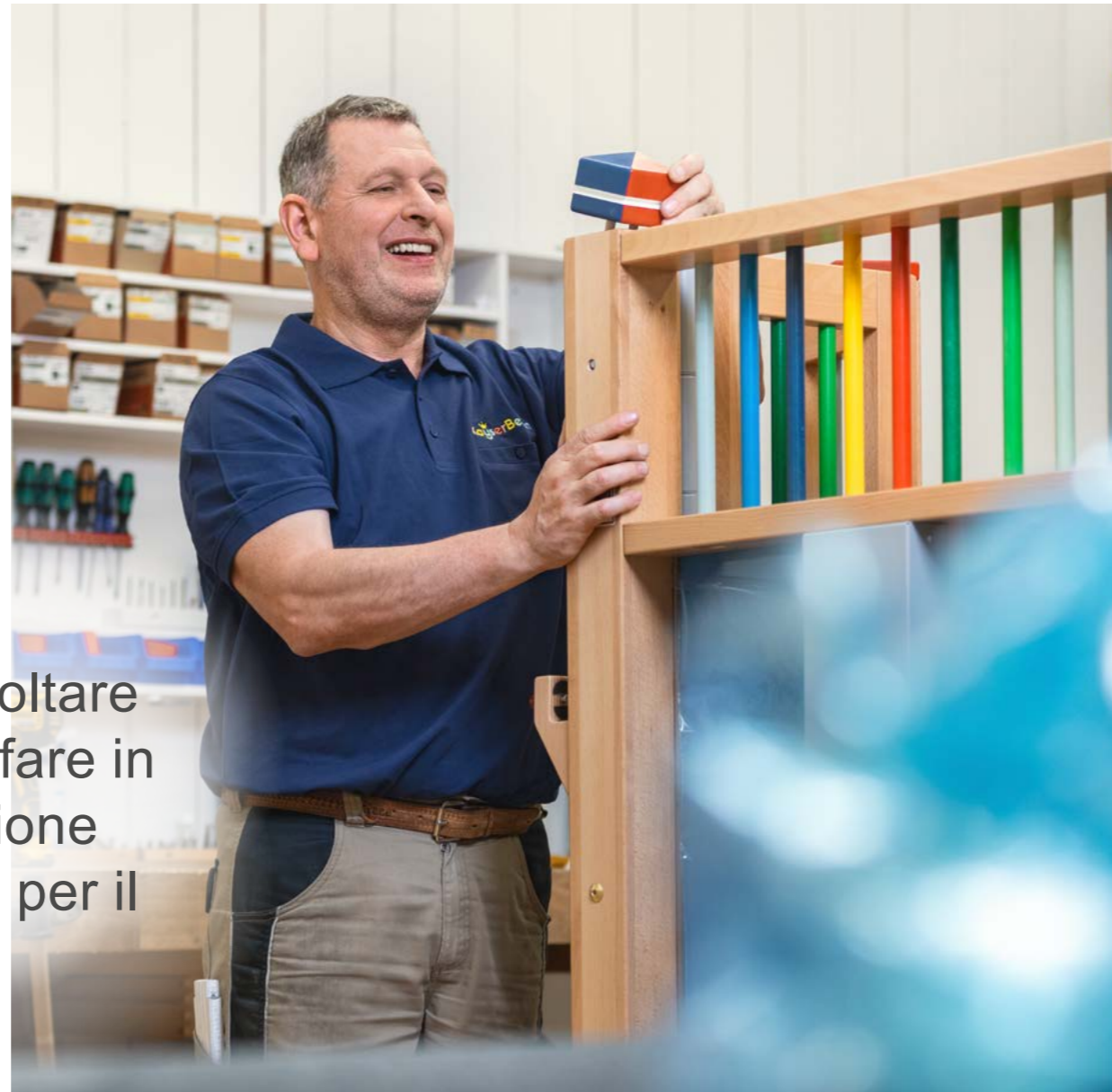

IL MIO LETTO IL MIO DESIGN A COLORI

FREE OF CHARGE



Design a colori
individuale con teste
dei montanti colorate

Design individuale del
colore dell'imbottitura













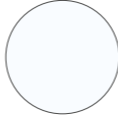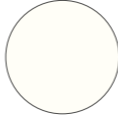











Design individuale dei
colori delle parti del telaio



OPZIONI DI COLORE

Per garantire che il tuo letto si adatti anche all'arredamento della tua casa, puoi scegliere il colore delle finiture. È possibile scegliere tra un totale di 27 colori, senza costi aggiuntivi

Colori vernice per legno


						
Traffic white RAL 9016	Pure white RAL 9010	Zinc yellow RAL 1018	Traffic yellow RAL 1023	Flame red RAL 3000	Carmine red RAL 3002	Telemagenta RAL 4010
						
Light pink RAL 3015	Beige red RAL 3012	Antique pink RAL 3014	Heather violet RAL 4003	Blue lilac RAL 4005	Traffic purple RAL 4006	Signal violet RAL 4008
						
Yellow green RAL 6018	Moss green RAL 6005	Cobalt blue RAL 5013	Sky blue RAL 5015	Pastel blue RAL 5024	Light blue RAL 5012	Light green RAL 6027
						
Dusty grey RAL 7037	Anthracite grey RAL 7016	Jet black RAL 9005				




IMBOTTITURA

Per l'imbottitura scegliere prima il materiale, poi il colore. Potete scegliere tra materiale in similpelle resistente al sudore e alla saliva, nylon resistente "Nevo" o tessuto "telone" Tarpaulin particolarmente robusto e resistente.


Colori imbottiture in similpelle

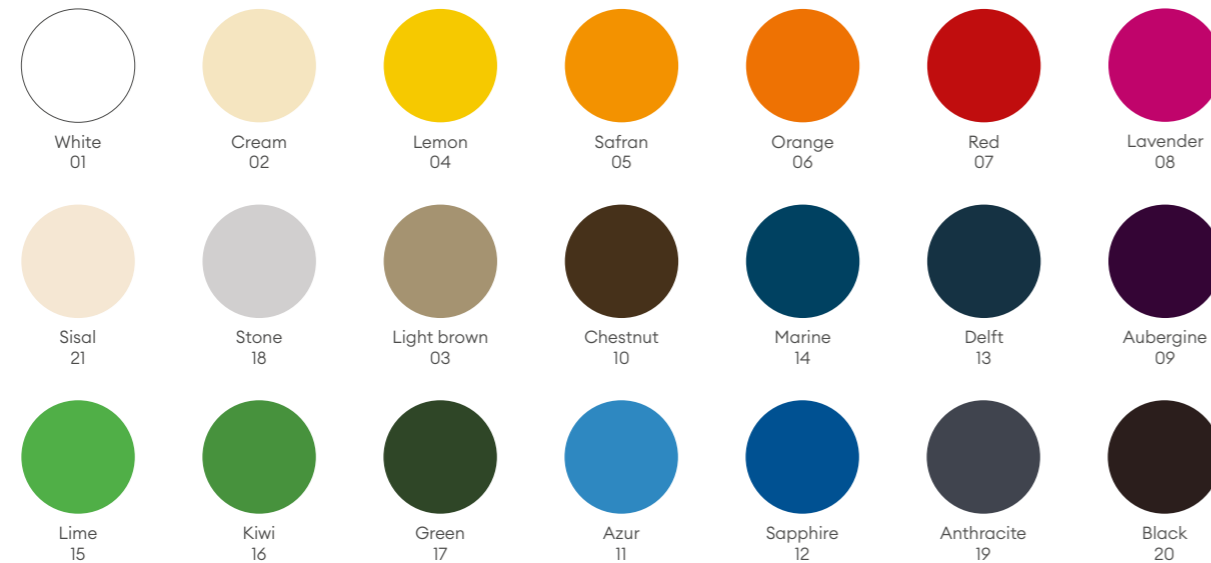

Colori imbottitura in Nylon Nevo

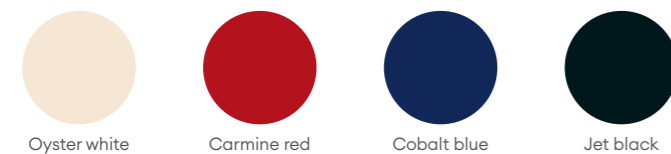

Colori imbottitura in tessuto "telone" Tarpaulin

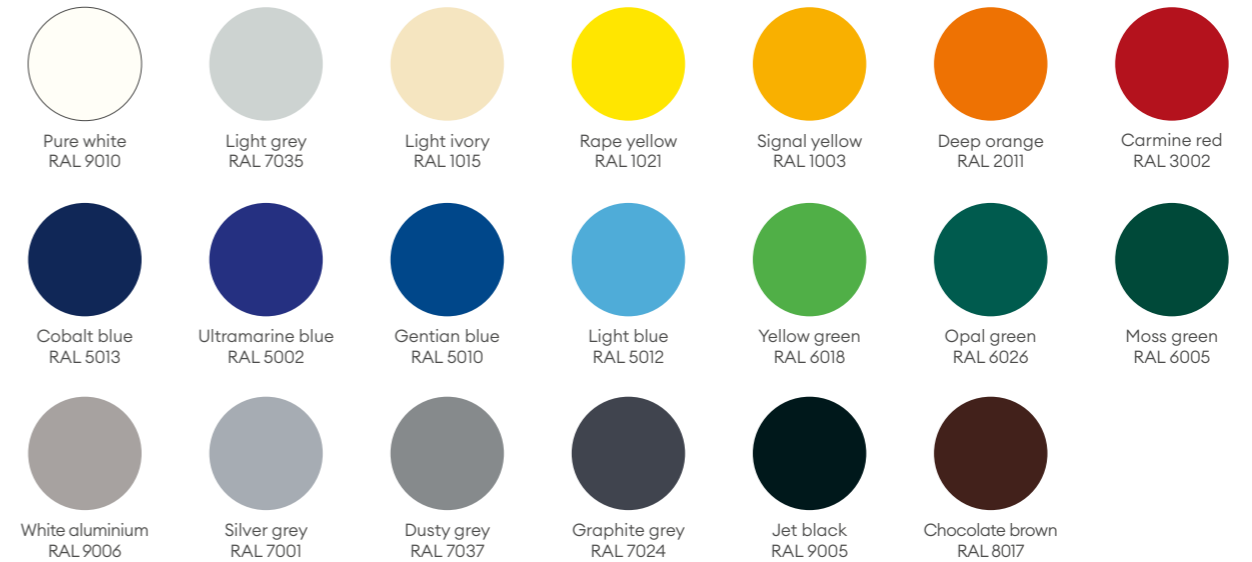

Variazioni di colore

Potrebbero esserci piccole differenze della colorazione della vernice e delle imbottiture rispetto alla rappresentazione stampata. Vi preghiamo di contattarci per avere i campioni di colore dei singoli colori.




PER NOI E PER L'AMBIENTE

Sostenibilità è una parola grossa: la prendiamo sul serio: dalla selezione dei materiali, alla produzione e oltre.

La salvaguardia dell'ambiente e l'uso sostenibile delle materie prime sono per noi obiettivi aziendali importanti. Per noi non è sufficiente rispettare semplicemente le normative legali pertinenti. La nostra responsabilità inizia con la selezione delle risorse. Utilizziamo solo materie prime sostenibili e naturalmente degradabili. La base dei nostri letti è sempre legno di faggio che otteniamo da silvicoltura sostenibile certificata. La nostra segatura viene trasformata in pellet di legno e poi utilizzata per il riscaldamento. Con la campagna "Un letto – un albero" viene piantato un albero per ogni letto venduto e collaboriamo con il Centro di competenza per l'agricoltura biologica della Bassa Sassonia. Lavoriamo a stretto contatto con i nostri fornitori per assicurarci che condividano i nostri sforzi quando si tratta del nostro ambiente.

Nei nostri audit valutiamo la tutela dell'ambiente e la sicurezza sul lavoro nonché i processi rilevanti per la qualità e, se necessario, sviluppiamo insieme soluzioni. Copriamo il nostro intero fabbisogno energetico con elettricità verde proveniente al 100% da fonti rinnovabili. Attraverso misure mirate nei nostri processi e nell'approvvigionamento delle materie prime, siamo in grado di eliminare quasi completamente le nostre emissioni di CO₂. Inoltre, abbiamo trasformato circa 4.500 mq di terreno incolto in prato fiorito per le api e sono stati piantati 50 tipi diversi di alberi da frutto. La nostra passione va ben oltre la produzione dei nostri prodotti: miriamo alla conservazione ecologica della nostra casa, la brughiera di Lüneburg.

Ambiente

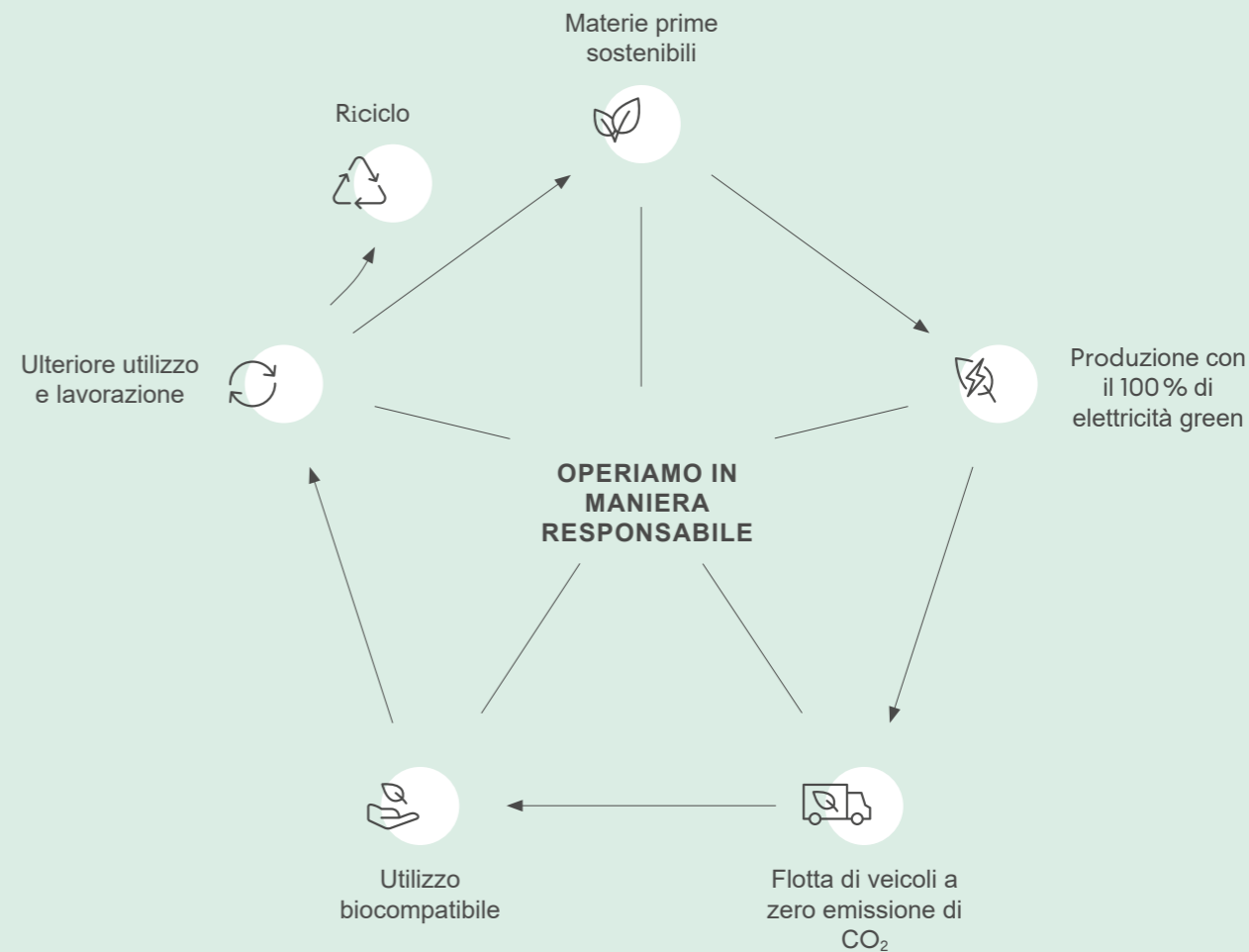

NOSTRO SERVIZIO

Un prodotto personalizzato necessita di un servizio personalizzato. Ci prendiamo sempre il tempo per discutere insieme delle tue esigenze: lasciati assicurare da una consulenza telefonica o di persona tramite una visita in loco, la spedizione gratuita dei campioni e molto altro ancora.

CONSULENZA ALLE FAMIGLIE

Cerchi una soluzione letto personalizzata per tuo figlio che soddisfi le sue esigenze? Ce l'abbiamo!

- Consulenza telefonica o di persona
- Consigli dai rivenditori di zona
- Spedizione gratuita dei campioni

CONSULENZA PER I RIVENDITORI ORTOPEDICI

Come ortopedia, desideri qualità e servizio certificati per i tuoi clienti? Parla con noi!

- Consulenza telefonica per rivenditori e clienti.
- Su richiesta, elaborazione completa dell'offerta/ consulenza con il cliente fino alla consegna e al montaggio del letto.
- Formazione personale e ispezioni dei letti presso KayserBetten
- Servizio di installazione
- Spedizione gratuita dei campioni
- Consulenza per le prescrizioni sanitarie
- Valutazione per il riutilizzo
- Fornitura gratuita di materiale pubblicitario
- Test per l'idoneità dei disinfettanti

CONSULENZA ALLE ISTITUZIONI

Cerchi un partner affidabile per il quale efficienza, qualità e servizio siano più di semplici parole? Siamo qui per te!

- Consulenza telefonica e di persona
- Visione dei letti e della fabbrica KayserBetten
- Consigli su rivenditori vicini a te
- Spedizione gratuita di campioni
- Test per l'idoneità dei disinfettanti



Attendiamo con ansia la vostra chiamata o visita!

Rivenditore ITALIA:

medimec

Telefono: +39 546 46870

Mail: medimec@medimec.it

www.medimec.it

Produttore:

KayserBetten
Rieper Straße 12
29683 Dorfmark

CONTACT OUR SERVICE

Legal notice

Publisher: KayserBetten GmbH & Co. KG, Rieper Straße 12, 29683 Bad Fallingbostel-Dorfmark

Design and concept: Redeleit und Junker

Photographs: Benno Cray

Product visualisations: mindstroem

Image credits: Adobe Stock, Getty Images

Status February 2022



www.kayserbetten.de